


Легко УДАЛИТЬ


Удобное удаление

Уровень адгезии материалов идеально сбалансирован таким образом, что брекет, кольца и прочие ортодонтические конструкции удерживаются на месте на протяжении всего периода лечения, но при этом в процессе их удаления эмали не наносится вреда. Естественная влажная среда полости рта также помогает поддерживать оптимальный уровень адгезии, обеспечивая надежную фиксацию конструкций.

Прочность адгезии брекетов

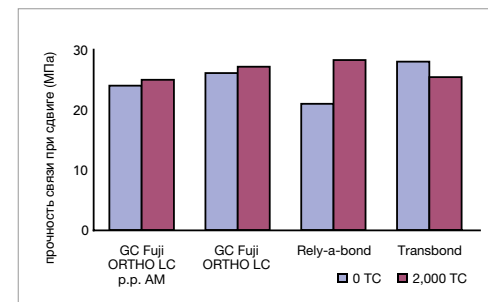

Прочность адгезии колец

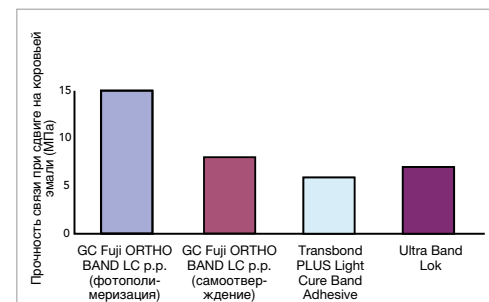

Внутренние данные отдела исследований и разработок компании GC, Япония

Великолепные результаты

Вид сразу после удаления брекетов, фиксированных на GC Fuji ORTHO LC



Долговременное фторовыделение помогает защитить эмаль от повреждений

Вид сразу после удаления брекетов, фиксированных на композитный цемент



Фторовыделения недостаточно, чтобы предотвратить появление белых пятен

Линейка материалов GC Fuji ORTHO

Самоотверждаемые



Fuji ORTHO

Порошок / Жидкость
Упаковка Intro: 40 г порошка, 2 x 6.8 мл жидкости
Отдельно: 40 г порошка, 6.8 мл жидкости



Fuji ORTHO Band Paste Pak

Отдельно: 2 x 13.3 г (7.2 мл) Paste Pak картриджа и блок для замешивания

Светоотверждаемые



Fuji ORTHO LC

Порошок / Жидкость
Упаковка Intro:
15 г порошка, 6.8 мл жидкости
Отдельно:
40 г порошка, 6.8 мл жидкости
Капсулы
50 капсул
(объем замешанного материала в капсуле 0.10 мл)



Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Отдельно:
2 x 13.3 г (7.2 мл) Paste Pak картриджа
Стартовый набор:
1 x 13.3 г (7.2 мл) Paste Pak картридж,
20 x наконечников для замешивания LC,
2 x гель-кондиционер ORTHO Gel Conditioner,
15 наконечников-кисточек



Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Отдельно:
2 x 12.9 г (7.2 мл) Paste Pak картриджа и блок для замешивания

Сопутствующие материалы



Диспенсер для картриджей
Paste Pak Dispenser



Пистолет для капсул
Capsule Applicator



Кондиционер
GC ORTHO Conditioner



Гель-кондиционер
GC ORTHO Gel Conditioner



Наконечники для замешивания
GC Mixing tips LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
RU - 129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13, офис 316
Тел. +926.007.21.31
russia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор продукции компании ДЖИ СИ в России:
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru

Легко УСТАНОВИТЬ -

Легко УДАЛИТЬ

Фиксация ортодонтических конструкций - с GC это просто.

Fuji ORTHO
от GC.

Сочетание фторовыделения, удобства в работе и уровня адгезии, оптимального для ортодонтии. Линейка материалов GC Fuji ORTHO - отличное решение: великолепные результаты, довольные пациенты.

GC

GC

z LLO RU 2 42 03/11

Легко УСТАНОВИТЬ

Модифицированные полимером стеклоиономерные цементы линейки GC Fuji ORTHO обеспечивают **великолепные результаты** работы - **благодаря фторовыделению**, а также тому, что с их помощью брекеты и прочие ортодонтические конструкции **легко устанавливаются и легко удаляются** после окончания лечения.

Удобная установка

При работе с материалами линейки Fuji ORTHO Вам гарантирована удобная и простая установка конструкций, поскольку не требуется ни протравливать рабочие поверхности, ни сохранять рабочее поле сухим. Таким образом, в процессе лечения врач-ортодонт не теряет времени и не расходует лишнего материала.

Шаг за шагом



Установите брекет, покрытый материалом, в нужное положение, при этом не пересушивайте поверхность зуба.



Произведите начальную полимеризацию в течение 5 секунд, затем удалите излишки материала экскаватором.



Окончательно полимеризуйте материал, по 20 секунд на каждый брекет.

Dr. A. Kotogi, Япония

Великолепная защита

Поскольку материал не требует протравливания, зубы не подвергаются повреждению на подготовительном этапе. Чтобы обеспечить дополнительную защиту и повышенную прочность адгезии, нанесите гель ORTHO Gel Conditioner на 10 секунд для мягкого кондиционирования эмали.




Тщательно очистите и отполируйте поверхности зубов.




Нанесите гель-кондиционер Fuji ORTHO Gel Conditioner

Dr. A. Kotogi, Япония

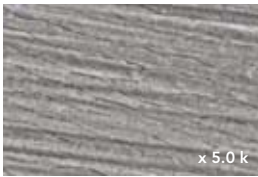


Мягкое кондиционирование с помощью геля Fuji ORTHO Gel Conditioner

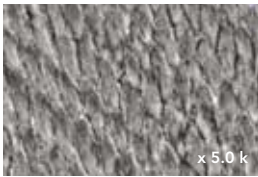

Структура эмали после протравливания кислотой

Уровень фторовыделения

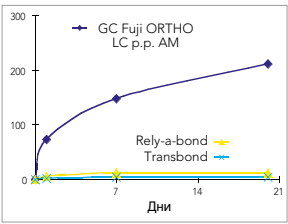

Внутренние данные отдела исследований и разработок компании GC, Япония

Внутренние данные отдела исследований и разработок компании GC, Япония

Долговременное и равномерное фторовыделение, свойственное стеклоиономерам, помогает дополнительно защитить эмаль, прилегающую к брекетам и иным ортодонтическим конструкциям, создавая так называемую зону ингибирования. Этот процесс значительно снижает риск возникновения белых пятен.

Свойства & преимущества	Самоотверждение		Фотополимеризация			
Порошок / Жидкость Самая экономичная форма выпуска Возможность точно отмерить нужную дозу материала	Fuji ORTHO Порошок / Жидкость		Fuji ORTHO LC Порошок / Жидкость			
Капсулы Быстрое, простое, прямое нанесение Позволяет быстро получить нужную дозу материала в правильной пропорции				Fuji ORTHO LC Капсулы		
Паста / Паста Материал легко извлекается, можно замешать вручную или автоматически, используя специальные насадки Automix Любое необходимое количество, всегда в нужной пропорции		Fuji ORTHO Band Paste Pak			Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix
Время замешивания	30"	15"	30"	10"	-	15"/ -
Рабочее время	2'50"	3'30"	3'15"	3'00"	5'00"	3'30"
Время отверждения	3'00"	3'00"	20"	20"	20"	20"
Толщина слоя	23 μ	3 μ	24 μ	30 μ	18 μ	3 μ

