




Текущие материалы, которые
работают там, где прочие пасуют

G-ænial Universal Flo

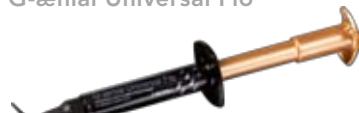

Шприц



Шинирование



Полости, подготовленные по методикам Минимальной Интервенции



Прямые реставрации по I, II, III, IV, V классу



Dr. J. Tarie Guadix,
Испания



Dr. M. Miyazaki,
Япония

G-ænial Flo



Шприц



Лайнер



Пломбирование
маленьких полостей



Запечатывание
фиссур



Заполнение
поднутрений



Туннельная
реставрация



Dr. J. Sabbagh,
Бельгия

Откройте для себя линейку жидкотекучих материалов G-ænial



G-ænial Universal Flo

Гениал Универсал Фло

1 x 3.4 г (2 мл), 10 насадок для шприцов, 1 светозащитный колпачок

Имеется 15 оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

G-ænial Flo

Гениал Фло

1 x 3.8 г (2 мл), 10 насадок для шприцов, 1 светозащитный колпачок

Имеется 8 оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Russia
129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13,
офис 316
Тел. /926/ 007-21-31
info@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор

продукции компании ДЖИ СИ в России:
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru

GC

z OLF RU 8 67 11/10




Жидкотекучие композиты

G-ænial - Новое поколение

Жидкотекучий композит с расширенным спектром показаний, ключевыми особенностями которого являются удобство в работе, долговечность реставраций и идеальная эстетика - это то, что Вы ищете? Ваш выбор - G-ænial Flo и Universal Flo.


С момента появления жидкотекучих композитов в 1995 году объем их применения быстро и неуклонно растет. Специалисты сразу же оценили преимущества этих материалов, легкость извлечения и внесения в полость, которые достигались в основном за счет снижения количества наполнителя в составе этих реставрационных материалов.

К сожалению, вскоре стало очевидно, что снижение объема наполнителя ведет к ухудшению физических и механических свойств материала, что резко ограничило спектр показаний к применению этих композитов.

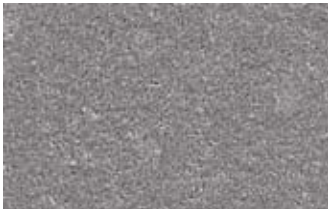

G-ænial Universal Flo

В поисках решения компания GC создала G-ænial Flo и G-ænial Universal Flo - два материала, при изготовлении которых используется уникальная технология обработки наполнителя. В отличие от прочих жидкотекучих композитов, в этих материалах содержание наполнителя выше, а его частицы распределены гомогенно.

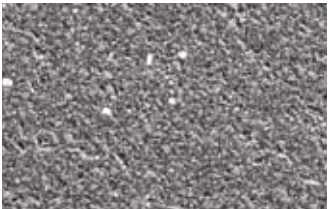

G-ænial Flo


Внутренние данные Отдела исследований и разработок компании GC

Физические свойства этих материалов соответствуют физическим свойствам традиционных композитов, что дает возможность использовать материалы более широко, чем обычные жидкотекучие композиты.

Экономичное и эргономичное извлечение материала

Оба материала выпускаются в шприцах особого дизайна, преимущества которого в следующем:

- Эргономичность: размер шприца достаточно большой, чтобы его было удобно держать в руке, поэтому для извлечения материала требуется минимум усилий.
- Простое нанесение: поверхность носика насадки обработана таким образом, что паста не прилипает к ней.
- Экономичность: остаток материала в использованном шприце минимален - менее 0.04 мл.

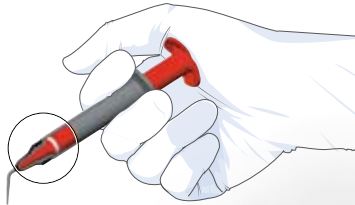

G-ænial Universal Flo

Текучесть - высокая прочность и блеск

G-ænial Universal Flo предлагает Вам уникальную комбинацию низкой вязкости, которая обеспечивает простое и удобное внесение материала, и непревзойденных физических свойств, гарантирующих надежность и долговечность реставраций.


G-ænial Universal Flo можно использовать:

- В качестве материала для прямой реставрации при работе с любыми полостями I, II, III, IV и V класса
- Для пломбирования полостей, подготовленных по методикам Минимальной Интервенции
- Для шинирования (иммобилизации подвижных зубов)

G-ænial Universal Flo обладаем целым спектром преимуществ, которые ставят этот материал впереди стандартных жидкотекучих композитов стоматологического рынка:

Прочность и долговечность

При работе с жидкотекучим композитом одним из важнейших вопросов для стоматолога является долговечность и функциональность материала. G-ænial Universal Flo демонстрирует физические параметры стандартного композитного материала, обладая при этом низкой вязкостью. Это стало возможно благодаря обработке, количеству и распределению частиц наполнителя.

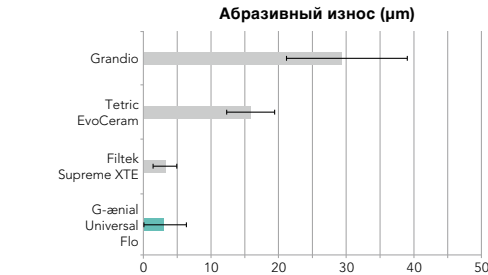

Внутренние данные Отдела исследований и разработок компании GC, подробности тестирования предоставляются по запросу.

Текучесть и внесение материала

Вязкость G-ænial Universal Flo тщательно сбалансирована с целью получения материала, который легко течет и удобно вносится в полость. В то же время материал обладает высокой тиксотропностью, его текучесть не избыточна, и он способен сохранять форму.



G-ænial Universal Flo



Уровень блеска неотполированного композита. Крайний левый образец - G-ænial Universal Flo

Помимо всего перечисленного выше, G-ænial Universal Flo обеспечивает великолепную эстетику с эффектом невидимости. Благодаря широкому спектру из 15 оттенков и 3 степеней светопроницаемости, получить высоко эстетичные реставрации теперь просто и удобно.

G-ænial Flo

Текучесть - идеальная адаптация и высокая рентгеноконтрастность

G-ænial Universal Flo - простой в работе, рентгеноконтрастный жидкотекучий композит, который обладает всеми свойствами, необходимыми для успешного клинического применения:

- В качестве лайнера или для заполнения поднугрений
- При туннельном препарировании
- Для пломбирования маленьких полостей
- Для запечатывания фиссур


G-ænial Flo обладает целым спектром преимуществ, которые позволяют решить проблемы, связанные с традиционными жидкотекучими композитами:

Смачиваемость и текучесть


При нанесении первого слоя композита каждого стоматолога волнует в первую очередь смачиваемость материала и его способность адаптации к стенкам полости. G-ænial Flo вносится легко и удобно благодаря своей текучести. Материал обладает также высокой смачиваемостью, за счет чего идеально адаптируется к стенкам полости, не образуя воздушных карманов.



G-ænial Flo

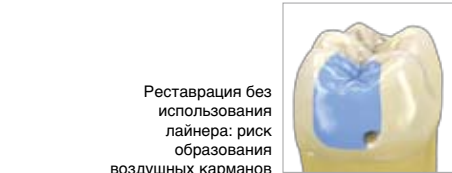

Реставрация без использования лайнера: риск образования воздушных карманов

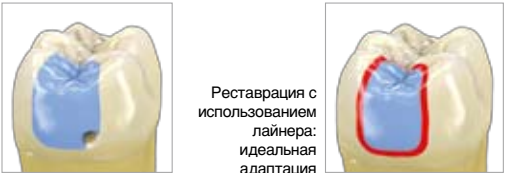

Реставрация с использованием лайнера: идеальная адаптация


Рентгеноконтрастность

Рентгеноконтрастность G-ænial Flo составляет примерно 230% Al, что превышает параметры эмали; за счет этого материал легко отличим от тканей зуба, и реставрации удобно контролировать с помощью рентгеновских снимков.


Надежность

Идеально сбалансированные физические свойства материала полностью соответствуют спектру показаний к его применению.

G-ænial Flo завершает линейку жидкотекучих композитов; выпускается в 8 оттенках, включая 2 опакowych оттенка. G-ænial Flo идеально комбинируется в работе с G-ænial Anterior & Posterior.

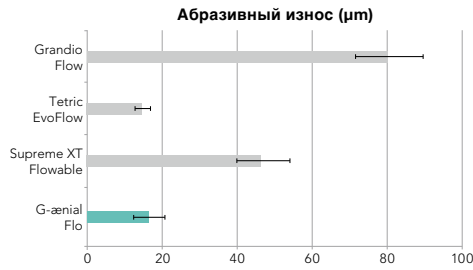

Внутренние данные Отдела исследований и разработок компании GC, подробности тестирования предоставляются по запросу.

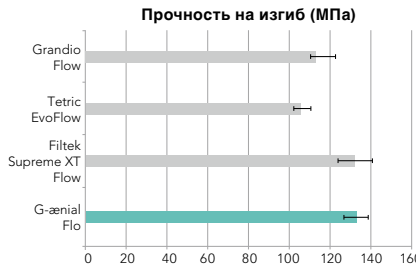

Внутренние данные Отдела исследований и разработок компании GC, подробности тестирования предоставляются по запросу. Тестирование проводилось согласно стандарту ISO 4049:2000.

