

**Happy
Birthday
Vista-Tec!**
Limited Edition 20 years

POLYDENTIA SA
Swiss Products for Fine Dentistry

ООО „Крафтвэй Медикал“
Москва, 3-я Мытищинская ул., 16,
(495)232-6933, 8-800-100-100-9
dental@kraftway.ru

www.kraftwaydental.ru



Сделано в Швейцарии:

Polydentia SA I Swiss Products for Fine Dentistry
Strada Cantonale I CH-6805 Mezzovico Lugano


Phone +41 (0)91 946 29 48 I Fax +41 (0)91 946 32 03
www.polydentia.com I info@polydentia.com

Закажите сегодня!

Vista-Tec™
ultra light protective Shield

Наименование	Артикул
Vista-Tec ultra light Protective Shields 20 years Edition	
1 красная рамка + 5 экранов	REF 5621/20y
1 красная рамка + 10 экранов	REF 5624/20y

POLYDENTIA SA
Swiss Products for Fine Dentistry

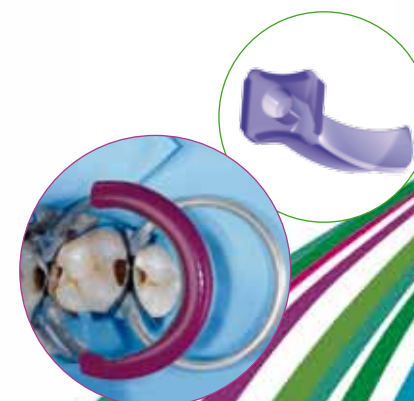

www.polydentia.com

**каталог
продукции
2011 / 2012**



Альфред Шаффнер, Президент
Клаудиа Шаффнер Паффи, Вице Президент



Благодарим Вас за выбор продукции Polydentia SA

В течение 30 лет мы уделяем большое внимание разработке и продвижению новой продукции с целью обеспечения её максимальной функциональности и удобства.



Ориентирование на КЛИЕНТА

Мы понимаем Ваши потребности и превращаем их в инновационные решения, всегда сохраняя наше традиционное внимание к качеству, безопасности и эффективности, а также заботимся о требованиях пациентов. Постоянное взаимодействие с Вами и с нашими международными торговыми партнерами является важным обоснованием для нашей деятельности.

Гибкость, забота о качестве продукции и окружающей среде

Наличие собственного производства позволяет нам создавать продукты с инновационными и уникальными особенностями. Polydentia SA тщательно поддерживает высокие стандарты качества, которые присущи всем товарам, сделанным в Швейцарии.

Совершенствование технологий и забота об окружающей среде - основные элементы нашей работы. Ответственное потребление энергии характеризует всю систему производства продукции Polydentia SA.

Инновации, динамика и страсть

Новые проекты, инновационные технологии, высокий уровень производства и ориентация на клиента являются основными элементами нашей работы. Мы работаем для Вас и для Ваших пациентов!

Мы благодарим Вас за доверие и приглашаем Вас заглянуть в наш каталог и разделить наш интерес к открытию новых продуктов, а также увидеть те, которые уже известны.

Матрицы, матричные системы

Матрицы из нержавеющей стали и прозрачного полиэстера:

- 6 Tofflemire Matrices (0.025 - 0.03 - 0.04 мм)
- 6 Tofflemire Transparent Matrices
- 6 Superthin Matrices (0.03 мм)
- 6 Clearmat Matrices
- 6 Siqveland Matrices (0.05 мм)
- 6 Transparent Anterior Matrices
- 7 Tofflemire Contoured Matrices (0.025 - 0.04 мм)
- 7 Contoured Anatomical Matrices (0.03 мм) *New*
- 7 Softrix Matrix Strip (0.025 мм)
- 7 ST Matrix Strip (0.03 мм)
- 7 Soft Matrix Strip (0.05 мм)
- 7 Matrix Strip 0.05 (0.05 мм)
- 8 Stripmat transparent matrix band
- 8 Stripmat Eco transparent matrix band
- 8 Stripmat Anatomic, матрицы анатомической формы в рулоне
- 8 Occlustrip окклюзионные полоски
- 8 Cervical Former пришеечный формер *New*
- 9 Dispens-O-Mat: Anterior, Incisal, Posterior самоклеющиеся матрицы

Матричные системы:

- 10 Quickmat Deluxe секционная матричная система, с металлическими кольцами Re-Force *New*
- 11 Quickmatrix Forceps, инструмент для секционных матриц
- 11 Щипцы Rubber Dam Clamp Forceps
- 12 Maximat Plus матричная система с фиксирующим устройством, с автоклавируемой шпилькой *New*

Финирование и полирование

- 13 Tria-Shine абразивные полоски для полирования
- 13 Abrasive Polishing Strip абразивные полоски
- 13 Полиры Polydentia Composite & Universal Polishers
- 13 My-Rack, автоклавируемая подставка для полиров *New*

Клинья

- 14 Деревянные клинья Interdental maple wood wedges
- 14 Клинья My-Wedge
- 14 Прозрачные клинья Transparent wedges
- 15 Клинья The Wedge

Реставрации со стекловолоконными штифтами

- 16 Матрицы Coremat мультиразмерные, для надстройки культи зуба
- 16 Штифты Polydentia GF Posts
- 16 Дрилы Polydentia GF Precision Drills



*Новинка
стр. 7*

Контурные анатомические матрицы (0.03 мм)



*Новинка
стр. 8*

Cervical Former
Матричная система
для реставраций
по V классу



*Новинка
стр. 11*

Прозрачные секционные матрицы
для системы Quickmat Deluxe



*Новинка
стр. 10*

Кольца Re-Force
для системы Quickmat Deluxe



*Новинка
стр. 13*

My-Rack
автоклавируемая подставка
для полиров

Эндодонтия

- 18 Ограничитель Endo-Stops
- 18 Органайзер Stop-Card
- 18 Endo-Gauge V02 эндодонтическая подставка
- 18 Ручки-насадки Endo-Grippers

Шинирование

- 19 Линия продуктов Fiber-Splint
- 20 F-Splint-Aid
- 20 F-Splint-Aid Slim *New*
- 20 Clip&Splint фиксирующие зажимы *New*
- 21 Fiber-Splint
- 21 Fiber-Splint Ortho Evolution
- 22 Fiber-Splint ML Multi-Layer многослойная лента
- 22 Fiber-Splint ML Mini Starter Kit

Лаборатория

- 23 Fiber-Splint Lab System

Защитные очки и экраны

- 24 Vista-Tec ultra light защитный экран для лица
- 24 Vista-Tec ultra light защитный экран для глаз
- 25 Clipon для ношения с очками
- 25 L-Clipon для ношения с слупой
- 25 Экран Vista-Tec Orange shields
- 25 Blubloc protective очки
- 25 Очиститель Polydentia Clean

Инструменты, аксессуары, разное

- 26 Держатель для валиков Cotton roll holders
- 26 Шприцы для амальгамы Amalgam guns
- 26 Матрицедержатель Universal Matrix Retainer (straight)
- 27 Pick-it-Easy аппликатор с клеящей головкой
- 27 Кольца ID-Rings
- 28 Оклюзионный раствор Occlublu
- 28 Держатель салфеток Holdy
- 28 Антизапотеватель Anti-Mist
- 29 Hy-Drop дозатор для жидкостей *New*

*Новинка
стр. 12*

Автоклавируемая Шпилька
для системы Maximat Plus



*Новинка
стр. 20*

Clip&Splint
фиксирующие зажимы для идеального
позиционирования и адаптации
стекловолоконной ленты



*Новинка
стр. 20*

F-Splint-Aid Slim
готовая система для быстрого, надежного и
эстетичного шинирования



*Новинка
стр. 29*

Hy-Drop
дозатор для малых
количеств жидкости

Наименование	Кол-во	Арт.
Ширина 6.3 мм  0.025 мм	50 шт.	 REF 5920
Ширина 5.5 мм  0.025 мм	50 шт.	 REF 5921

Наименование	Толщина	Кол-во	Арт.
Ширина 6.3 мм  0.04 мм	0.04 мм	50 шт.	 REF 6101
Ширина 5.5 мм  0.04 мм	0.04 мм	50 шт.	 REF 6103
Ширина 6.3 мм  0.03 мм	0.03 мм	50 шт.	 REF 6102
Ширина 5.5 мм  0.03 мм	0.03 мм	50 шт.	 REF 6104

Наименование	Кол-во	Арт.
Ширина 6.3 мм  50 шт.	50 шт.	 REF 5916
Ширина 5.5 мм  50 шт.	50 шт.	 REF 5936

Наименование	Толщина	Кол-во	Арт.
Премоляры  0.03 мм	0.03 мм	50 шт.	 REF 5715
 0.03 мм	0.03 мм	50 шт.	 REF 5714
 0.03 мм	0.03 мм	50 шт.	 REF 5713

Моляры  0.03 мм	50 шт.	 REF 5717
 0.03 мм	50 шт.	 REF 5718
 0.03 мм	50 шт.	 REF 5719

Наименование	Кол-во	Арт.
Премоляры  50 шт.	50 шт.	 REF 5915
 50 шт.	50 шт.	 REF 5914
 50 шт.	50 шт.	 REF 5913
Моляры  50 шт.	50 шт.	 REF 5917
 50 шт.	50 шт.	 REF 5918
 50 шт.	50 шт.	 REF 5919

Наименование	Толщина	Кол-во	Арт.
узкая  5 мм	5 мм	12 шт.	 REF 5725
широкая  7 мм	7 мм	12 шт.	 REF 5727

Наименование	Кол-во	Арт.
6 мм  100 шт.	100 шт.	REF 5216
7 мм  100 шт.	100 шт.	REF 5217
8 мм  100 шт.	100 шт.	REF 5218
ассорти	300 шт.	REF 5210

Tofflemire Matrices (0.025 mm - 0.03 mm - 0.04 mm)

- Нержавеющая сталь
- Легкая полировка
- Можно использовать с любым матрицедержателем
- Микротонкие матрицы 0.025 мм подходят для использования в очень узких межзубных промежутках
- Мягкость материала обеспечивает идеальную адаптацию матрицы к поверхности зуба



Tofflemire Transparent Matrices

Сделаны из прозрачного полиэстера, предназначены для восстановления МОД полостей в зубах жевательной группы при помощи светоотверждаемых композитов.



Superthin Matrices (0.03 mm)

- Нержавеющая сталь
- Анатомической формы, супертонкие – 0,03 мм
- Выпускается в трех различных формах для премоляров и моляров



Clearmat Matrices

Прозрачные матрицы из полиэстера, обладающие анатомической формой, предназначены для восстановления МОД полостей в зубах жевательной группы при помощи светоотверждаемых композитов. Предназначены для хорошей адаптации и создания хороших контактных пунктов.



Siqveland Matrices (0.05 mm)

- Нержавеющая сталь 0.05 мм
- Можно использовать с любым матрицедержателем



Transparent Anterior Matrices

Полиэстерные полоски анатомической формы (0,05 мм), особенно удобны для проведения реставраций фронтальной группы зубов. Высокоустойчивы, не прилипают к композитным материалам. Существует 3 размера по ширине, для каждого размера характерна своя цветовая маркировка.



Наименование	Кол-во	Арт.
0.04 мм (.0015")		
Ширина 6.3 мм	30 шт.	 REF 6106
Ширина 5.5 мм	30 шт.	 REF 6107

Microthin 0.025 мм (.001")		
Ширина 6.3 мм	30 шт.	 REF 6108
Ширина 5.5 мм	30 шт.	 REF 6109

Наименование	Кол-во	Арт.
Премоляры  30 шт.	30 шт.	 REF 6115
 30 шт.	30 шт.	 REF 6114
 30 шт.	30 шт.	 REF 6113
 30 шт.	30 шт.	 REF 6116

Моляры  30 шт.	30 шт.	 REF 6117
 30 шт.	30 шт.	 REF 6118
 30 шт.	30 шт.	 REF 6119
 30 шт.	30 шт.	 REF 6120

МАТРИЧНЫЕ ПОЛОСКИ

- Нержавеющая сталь
- Практичный диспенсер
- Доступны в нескольких модификациях
- Может использоваться с любым матрицедержателем, а также с Maximat Plus (стр. 12)

Ширина	Длина	Арт.
6 мм  3 м	3 м	 REF 5906
8 мм  3 м	3 м	REF 5908
10 мм  3 м	3 м	REF 5910

Ширина	Длина	Арт.
5 мм  3 м	3 м	 REF 5235
6 мм  3 м	3 м	 REF 5236
7 мм  3 м	3 м	 REF 5237
10 мм  3 м	3 м	REF 5230

Ширина	Длина	Арт.
5 мм  3 м	3 м	 REF 5275
6 мм  3 м	3 м	 REF 5276
7 мм  3 м	3 м	 REF 5277

Ширина	Длина	Арт.
5 мм  3 м	3 м	 REF 5255
6 мм  3 м	3 м	 REF 5256
7 мм  3 м	3 м	 REF 5257

Tofflemire Contoured Matrices (0.04 mm и microthin 0.025 mm)

- Нержавеющая сталь
- Анатомическая форма
- Предназначены для реставрации жевательной группы зубов
- Новинка: минимальная толщина - 0,025 мм, удобны для постановки в узких межзубных пространствах
- Легко полируются



Contoured Anatomical Matrices (0.03 mm)

- Изготовлены из мягкой нержавеющей стали, легко полируются
- Анатомическая форма, толщина матрицы 0.03мм
- Со специальным расширением для закрытия шейки зуба
- Доступны в 8 различных формах для премоляров и моляров



Softrix matrix strip (0.025 mm)

- Матрицы из мягкой нержавеющей стали
- Минимальная толщина 0.025 мм
- Матрицы не обладают внутренней «памятью» формы, предназначены специально для создания плотных контактных пунктов. Устойчивы при полировке соседних зубов.
- Подходят для узких межзубных промежутков



ST matrix strip (0.03 mm)

- Нержавеющая сталь
- Супертонкие 0.03 мм



Soft matrix strip (0.05 mm)

- Мягкая нержавеющая сталь 0.05 мм
- Матрицы не обладают внутренней «памятью» формы. Устойчивы при полировке соседних зубов.
- Для лучшего межзубного контакта
- Мягкость материала позволяет оптимально адаптировать матрицу к поверхности зуба



Matrix strip 0.05 (0.05 mm)

- Нержавеющая сталь
- Толщина 0.05 мм
- Экономичные



Ширина	Длина	Арт.
6 мм	15 м	REF 5006
8 мм	15 м	REF 5008
10 мм	15 м	REF 5010

Stripmat

Стрипмат, матрица в рулоне
Непрерывная рулонная матрица (0.05 мм), изготовлена из прозрачного полиэстера, предназначена для работы со светоотверждаемыми композитными материалами. Очень тонкая и прочная, не рвётся при натяжении. Доступна в 3 размерах. Упаковка с острым режущим краем позволяет легко отрезать нужную длину.

Ширина	Длина	Арт.
6 мм	15 м	REF 5006 E
8 мм	15 м	REF 5008 E
10 мм	15 м	REF 5010 E

Ширина	Длина	Арт.
9 мм	15 м	REF 5225

Ширина	Длина	Арт.
20 мм	25 м	REF 5901



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для пломбирования полостей по V классу
- После постановки пломбы необходима только ее минимальная обработка и полировка
- Экономит время
- 2 матрицы в одной
- Для anteriоров и posteriоров

Наименование	Арт.
Cervical Former Набор	REF 5252
Состав набора:	
1 длинный изогнутый держатель	
1 короткий прямой держатель	
50 матриц	
Refill упаковка:	
50 матриц	REF 5251

Stripmat Eco

Stripmat поставляется в практичном и экономичном прозрачном блистере, что позволяет видеть остаток матрицы в упаковке. 3 размера.

Stripmat Anatomic

Матрица анатомической формы в рулоне

Непрерывная рулонная матрица (0.05 мм) изготовлена из прозрачного полиэстера. Фестончатый край обеспечивает лучшее прилегание в апроксимальной области. Упаковка с острым режущим краем позволяет легко отрезать нужную длину.

Occlustrip

Оклюзионные полоски

Микротонкие прозрачные полоски (0.015 мм) для реставраций по I классу. Микротонкие, не приклеиваются. Установка: положите пленку на последний слой композитного материала пломбы и попросите пациента сомкнуть зубы как обычно. После постановки пломбы необходима ее минимальная обработка и полировка. Не прилипает к композитному материалу.

Cervical Former

Пришеечный формер

Представляют собой систему для реставраций в цервикальной области. Плотные, но эластичные матрицы обладают специальной формой, позволяющей выполнять реставрации без пор. За счет прозрачности матрицы возможен контроль над прикладываемым давлением, что в свою очередь препятствует выведению излишнего количества материала. Врач может сам вырезать нужный контур матрицы для идеальной припасовки к зубу. Матрицы сделаны из прозрачного полиэстера, позволяющего контролировать процесс пломбирования, а также имеют 2 контурных кончика. Матрицы проницаемы для света и не прилипают к композитным материалам. Матрицу следует установить в специальный держатель, помогающий принять форму, повторяющую контуры зуба. Существует 2 типа держателей матриц: короткий и прямой для фронтальной группы зубов и длинный и изогнутый для зубов фронтальной и жевательной группы.



DISPENS-O-MAT

- Самоклеющиеся матрицы
- Изготовлены из прозрачного полиэстера
- Удобный диспенсер
- Не требуют фиксации
- НОВИНКА: виден остаток матрицы в упаковке

Наименование	Ширина	Кол-во	Арт.
	6 мм	100 шт.	REF 5221
	7 мм	100 шт.	REF 5222
	8 мм	100 шт.	REF 5223



Наименование	Ширина	Кол-во	Арт.
	15 мм	100 шт.	REF 5240



Премоляры			
Наименование	Ширина	Кол-во	Арт.
	6 мм	100 шт.	REF 5926
	7 мм	100 шт.	REF 5927
	8 мм	100 шт.	REF 5928

Моляры			
Наименование	Ширина	Кол-во	Арт.
	6 мм	100 шт.	REF 5946
	7 мм	100 шт.	REF 5947
	8 мм	100 шт.	REF 5948



Dispens-O-Mat Anterior

Для реставраций на anteriорах по III классу

Представляют собой очень тонкие прозрачные самоклеющиеся матрицы, предназначенные для работы с композитами светового и химического отверждения. После установки не надо фиксировать матрицу пальцами или зажимами. 3 размера по ширине: 6 мм, 7 мм и 8 мм.



Dispens-O-Mat Incisal

Для реставраций на anteriорах по IV классу


Делают возможным осуществление нового метода реставрации полостей по IV классу (при разрушении уголков, боковых поверхностей зубов фронтальной группы). Наклеивая центральную часть и самоклеющиеся кончики матрицы позволяют создать ровную, без пор, поверхность реставрации. При этом создается оптимальный апроксимальный контакт с соседним зубом и не остается остатка материала.



Dispens-O-Mat Posterior

Для реставраций с использованием светоотверждаемых композитов на posteriорах

Самоклеющиеся особо тонкие прозрачные матрицы Диспенс-о-мат для премоляров и моляров подходят для всех реставраций из светоотверждаемых композитов в области постериоров и при размещении вкладок. Благодаря их самоклеющимся кончикам, нет необходимости в использовании традиционных матрицедержателей, которые могут затруднять проходимость света, особенно при реконструкции бугорков на постериорах. Матрица может быть расположена как с буккальной, так и с лингвальной стороны. Правильно расположенная и зафиксированная светопроводящими клиньями (такими, как, например, The Wedge), матрица гарантирует оптимальное светоотверждение всех поверхностей, включая апроксимально-цервикальную. Для того, чтобы обеспечить превосходное соответствие матрицы дентальной анатомии, самоклеющиеся матрицы Диспенс-о-мат для премоляров и моляров доступны 3-х различных высот: 6мм, 7мм и 8мм.

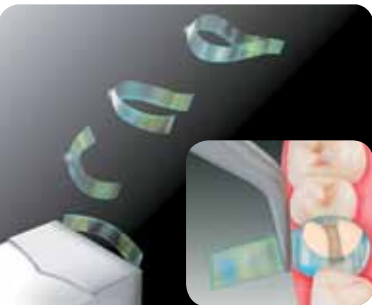

Смотри видеоролик на: www.polydentia.com

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают плотные контакты при создании композитных реставраций в области жевательной группы зубов
- **НОВИНКА:** накладка Re-Force увеличивает сепарационную силу кольца
- Дельта силиконовые трубочки в комплекте
- Секторальные матрицы с эффектом растягивания для поддесневых реставраций
- Прозрачные секторальные матрицы для полной полимеризации
- Кольца Quick rings могут быть наложены в случае реставрации полости по II классу МОД
- Совместим со стандартной системой раббер дам

Наименование	Арт.
Quickmat Deluxe Набор	REF 5701

Состав набора:	
5 колец Quick rings, 1 накладка Re-Force	<i>NEW</i>
10 цилиндрических силиконовых трубочек	
10 дельта силиконовых трубочек	
200 контурированных секционных матриц 0.04 мм, 100 шт. высотой 5 мм и 100 шт. высотой 6.4 мм	
100 контурированных секционных матриц 0.025 мм, 50 шт. высотой 5 мм и 50 шт. высотой 6.4 мм	
300 деревянных клиньев ассорти	

Refill упаковка:	
100 контурированных секционных матриц (высота 5 мм, толщина 0.04 мм)	REF 5705
100 контурированных секционных матриц (6.4 mm high, толщина 0.04 мм)	REF 5706
100 контурированных секционных матриц (высота 5 мм, толщина 0.025 мм)	REF 5735
100 контурированных секционных матриц (высота 6.4 мм, толщина 0.025 мм)	REF 5736
50 контурированных секционных матриц with extension (высота 6.4 мм, толщина 0.04 мм)	REF 5746
50 контурированных секционных матриц with extension (высота 6.4 мм, толщина 0.025 мм)	REF 5756
100 transparent sectional matrices (высота 5 мм)	<i>NEW</i> REF 5765
100 transparent sectional matrices (высота 6.4 мм)	<i>NEW</i> REF 5766
100 прозрачных секционных матриц with extension (высота 6.4 мм)	<i>NEW</i> REF 5776
5 колец Quick rings + 10 цилиндрических силиконовых трубочек	REF 5710
3 кольца Quick rings + 3 Re-Force + 8 дельта силиконовых трубочек	<i>NEW</i> REF 5704
30 цилиндрических силиконовых трубочек	REF 5711
30 дельта силиконовых трубочек	<i>NEW</i> REF 5712



Просто и эффективно

Quickmat Deluxe
Секторальные матричные системы для идеальной реставрации по II классу

Quickmat Deluxe представляют собой систему секторальных матриц, которая обеспечивает воссоздание идеальных, абсолютно точных и анатомически правильных контактных пунктов при создании реставраций по II классу. Система характеризуется простотой в использовании; один тип универсального кольца может быть применим в разных клинических ситуациях. Контурированные секторальные матрицы идеально подходят для воссоздания контактных пунктов рядом стоящих зубов, а также цервикальной области благодаря установленным там межзубным деревянным клинышкам. Кольца Quick rings, известные своей эластичностью, гарантируют идеальную анатомическую адаптацию матрицы к поверхности зуба. Кольца Quick rings автоклавируются при температуре 134 °C.

Polydentia расширила линейку матриц и аксессуаров и предлагает систему, для реставраций любой сложности зубов жевательной группы.

- **Кольца Quick rings:** сделаны из нержавеющей стали, автоклавируются при 134 °C. Они гарантируют идеальное прилегание матрицы к поверхности зуба. Более того, эти кольца очень удобны при восстановлении полостей II класса МОД благодаря специальному наклону их кончиков, делающему наложение колец Quick rings более простым.

- **Новинка Re-Force накладки для колец Quick rings:** при надевании накладки Re-Force на кольцо увеличивается сепарационная сила кольца. Данная накладка изготовлена из высокотехнологичных материалов и может быть простерилизована в автоклаве при 134 °C. Форма накладки придает кольцу большую жесткость: теперь у врача есть выбор – произвести сепарацию, используя деревянные клинышки и/или усиленные накладками кольца.

- **Новинка Дельта силиконовые трубочки:** чрезвычайно удобны при наличии обширных полостей. Трубочки надеваются на оба конца кольца Quick ring, они идеально подходят к поверхности зуба, благодаря их инновационной треугольной форме, хорошей адгезии и адаптационным возможностям матрицы.

- **Силиконовые трубочки (цилиндрические):** при наличии протяженных полостей они надеваются на кончики кольца Quick ring для того, чтобы усилить адгезию к матрице и предупредить проскальзывание матрицы слишком глубоко в интропроксимальное пространство.

- **Тонкие (0,04 мм) и микротонкие (0,025 мм) контурированные секторальные матрицы:** обладают анатомической формой, после их применения зуб легко отполировать. В случае наличия неровностей в межзубных пространствах микротонкие матрицы позволяют создать очень плотные контактные пункты с идеальной формой.

- **Контурированные матрицы со специальной возможностью растяжения:** позволяют достигнуть анатомических контуров и, следовательно, плотных проксимальных контактов при создании поддесневых реставраций и реставраций полостей с большой протяженностью.



Выбирать легко!
Хотите подобрать матрицы и клинья? Вам на страницу 27!

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кончики загнуты для более точной постановки матрицы
- Ребристый кончик для лучшей фиксации
- Усиленные твердосплавные кончики
- Уникальная конструкция
- Отличный обзор
- Оптимальная тактильная чувствительность

Наименование	Арт.
1 Quickmatrix Forceps	REF 5703

Наименование	Арт.
1 Rubber dam clamp forceps	REF 5702

ВАШЕ МНЕНИЕ:



Dr. G. Derchi
La Spezia - Italy

«Секторальные матрицы Quickmat я использую в своей практике уже несколько лет. Матрицы шириной 0,04 мм изготовлены из адаптивной стали – новые матрицы имеют возможность растягиваться и действительно очень удобны для полного закрытия цервикальной десны».



Dr. H. Van Der Elst
Bad Wiessee - Germany & Dubai - U.A.E.

«Благодаря силиконовым трубочкам, адаптация матрицы к зубу очень хорошая, также требуется меньше времени для создания формы композитной реставрации и ее полировки».

«Матрицы новой системы очень тонкие, что делает восстановление контактного пункта более удобным, а прохождение пространства между зубами более простым».



Dr. J. A. Fernández Ruiz
Ibiza (Balears) - Spain

«При последующих осмотрах после проведения реставрации мы наблюдаем отсутствие застревания пищи в межзубных промежутках, что является отражением нашего успешного лечения».

«Наши пациенты довольны удобством при проведении процесса лечения и оценивают результат на «очень хорошо» и «отлично»».



- **НОВИНКА: Секционные матрицы из прозрачного полиэстера:** также специальные матрицы с возможностью растяжения, позволяющие производить композитные реставрации по II классу.

- **Ассорти клиньев из древесины клена:** Разные размеры, для идеального подбора к любым межзубным промежуткам.



Quickmatrix Forceps

Щипцы для точного размещения и легкого удаления секторальных матриц

Специальный удобный инструмент обеспечивает легкое наложение секторальных матриц Quickmat и их извлечение после того, как реставрация будет завершена и будут созданы плотные контактные пункты. Специальный наклон кончиков разработан для того, чтобы предотвратить перекашивание секторальных матриц Quickmat контурированного типа. Ребристость на кончиках обеспечивает лучшее удержание матрицы, покрытие вольфрам-карбидом предотвращает повреждение и изнашивание кончиков. Кроме того, эргономичные и легкие щипцы удобно располагаются в руке и комфортны как для врача, так и для пациента. Инструмент изготовлен из нержавеющей хирургической стали высокого качества. Автоклавируются при 134 °C (273 °F).



Rubber Dam Clamp Forceps

Щипцы для Раббер дам

- Нержавеющая сталь
- Экономичны
- Автоклавируются при 134 °C (273 °F)
- Инструмент для установки Раббердам и колец для работы с секционными матрицами Quickmat



ПРЕИМУЩЕСТВА

УЖЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА...

- Устраняет необходимость в обычных матрицедержателях
- В полости рта остается только шпатель с матрицей, без рычагов - это обеспечивает больший комфорт для пациента
- Быстрое и простое применение
- Затягивание матриц одной рукой
- Лучшая видимость во время проведения реставрации
- Возможна постановка нескольких пломб одновременно в одном квадранте
- Матрица уже установлена в шпатель
- Создаются оптимальные контактные пункты при помощи клинышков, входящих в набор
- Универсальность: система может быть использована с матрицами любого типа, шириной до 7 мм

...В СОЧЕТАНИИ С НОВЫМИ:

- Уникальная система с автоклавируемой шпателью
 - Шпатель анатомической формы
 - Лучшее прилегание и адгезия к зубу
 - Повышенная устойчивость и стабильность шпателя
 - Возможность выбора между двумя видами шпателей, имеющимися в наборе:
- а) шпатели с уже зафиксированными на них матрицами – для экономии времени
б) автоклавируемые и применяемые повторно - более экономичные и экологически чистые

Наименование	Арт.
Maximat Plus Набор	REF 5190
Состав набора:	
1 инструмент для фиксации и натяжения	
5 пустых автоклавируемых шпателей	9189W
10 шпателей с зафиксированными контурированными металлическими матрицами (0.04 мм): 5 шт. 5.5 мм высота, 5 шт. 6.3 мм высота	
10 Tofflemire matrices микротонкие (0.025 мм), 5.5 мм высота	
10 Tofflemire matrices микротонкие (0.025 мм), 6.3 мм высота	
30 The Wedge wedges, assorted	
Refill упаковка:	
30 пустых одноразовых шпателей	REF 5121
100 пустых одноразовых шпателей	REF 5122
30 шпателей с зафиксированными контурированными металлическими матрицами	
0.04 мм толщина, 5.5 мм высота	REF 5123
0.04 мм толщина, 6.3 мм высота	REF 5124
30 шпателей с зафиксированными контурированными металлическими матрицами	
микротонкие (0.025 мм), 5.5 мм высота	REF 5125
микротонкие (0.025 мм), 6.3 мм высота	REF 5126
5 пустых автоклавируемых шпателей	9189W REF 5127
50 Tofflemire matrices микротонкие	
(0.025 мм), 5.5 мм высота	REF 5921
(0.025 мм), 6.3 мм высота	REF 5920



Все матрицы с этим символом совместимы с системой натяжения Maximat Plus



Лучше, быстрее, проще

Maximat Plus™

Быстрое и простое проведение реставраций благодаря удобному инструменту

Maximat Plus – это новая универсальная система, разработанная фирмой Polydentia SA для работы с металлическими и светопроводящими матрицами на зубах жевательной группы. Благодаря системе Maximat Plus врачу-стоматологу не надо использовать дополнительные ретейнеры для матрицы. Использование системы чрезвычайно просто: выбранная матрица помещается в выемку специальной катушки для фиксации матрицы. Катушка помещается в ручку-держатель, а затем матрица помещается на зуб и зажимается при помощи колесика на ручке-держателе. Степень фиксации матрицы стоматолог может контролировать самостоятельно. После проведения фиксации матрицы, ее оставляют в полости рта на время проведения лечения, что позволяет улучшить обзор пломбируемой полости.

Благодаря маленькому размеру, матричные катушки можно сочетать с постановкой стандартных клинышков. Благодаря системе Maximat Plus в одном квадранте полости рта возможна одновременная постановка нескольких пломб. После окончания лечения матрица снимается путем повторной установки ручки-держателя.

С системой Maximat Plus можно использовать все виды стандартных матриц для зубов жевательной группы зубов с шириной до 7 мм включительно. Для обеспечения высоких стандартов гигиены катушка для фиксации матриц предназначена для одноразового использования. Ручка-держатель, напротив, сделана из нержавеющей стали и аморфного пластика высокого качества и может подвергаться стерилизации в автоклаве при температуре 134 °C.

Для еще более быстрой работы с системой можно использовать катушки с уже установленными контурными матрицами (толщина 0,04 мм), а также с новыми матрицами с минимальной толщиной 0,025 мм.

The Maximat Plus kit от Polydentia теперь содержит:

- а) шпатели с уже зафиксированными на них матрицами одноразового использования (новой анатомической формы), позволяющие врачу быстро добиться оптимальных результатов.
б) новые, автоклавируемые при 134 °C шпатели, которые могут быть использованы повторно, и поэтому более экономичны и экологичны.



Смотри видеоролик на: www.polydentia.com



Сравнение с универсальным матрицедержателем Maximat Plus

7 x 12 mm



Универсальный матрицедержатель 100 x 10 mm



НОВАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА!
АВТОКЛАВИРУЕМАЯ ШПАТЕЛЬ!



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инновационная форма с изменяемой шириной
- Доступны в 3 разных вариантах абразивности

Наименование	Кол-во	Артикул
Fine (30 µm)	100 шт.	REF 5504
Medium (40 µm)	100 шт.	REF 5505
Coarse (60 µm)	100 шт.	REF 5506

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доступны в 3 разных вариантах абразивности
- Удобный дозатор с острым отрывным краем

Наименование	Кол-во	Артикул
Fine (30 µm)	10 м	REF 5511
Medium (40 µm)	10 м	REF 5501
Coarse (60 µm)	10 м	REF 5502

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Износостойкие
- Стерилизации в автоклаве до 134 °C (273 °F)
- НОВИНКА: My-Rack, практичная и удобная подставка для вращающихся инструментов

Универсальные полиры	Кол-во	Арт.
Pre-polish cup, коричневый	12 шт.	REF 5520
Pre-polish flame, коричневый	12 шт.	REF 5522
Pre-polish mini-point, коричневый	12 шт.	REF 5524
Polish cup, зеленый	12 шт.	REF 5530
Polish flame, зеленый	12 шт.	REF 5532
Polish mini-point, зеленый	12 шт.	REF 5534
Universal Polishers ассорти	12 шт.	REF 5540

Полиры для композита	Кол-во	Арт.
Pre-polish cup, желтый	12 шт.	REF 5550
Pre-polish flame, желтый	12 шт.	REF 5552
Pre-polish mini-point, желтый	12 шт.	REF 5554
Polish cup, красно-коричневый	12 шт.	REF 5560
Polish flame, красно-коричневый	12 шт.	REF 5562
Polish mini-point, красно-коричневый	12 шт.	REF 5564
Composite Polishers ассорти	12 шт.	REF 5570

My-Rack	9189W	
Универсальная подставка	1 шт.	REF 5580

Tria-Shine

Абразивные полоски для полирования

Контурные штрипы для финишной полировки композитных реставраций на апроксимальных контактных поверхностях. Изготовлены из эластичного полиэстера, на который нанесены частицы оксида алюминия. Треугольная форма и изменяемая ширина штрипов (от 1,5 до 5,5 мм) облегчает их введение в межзубное пространство, при этом контактная точка по желанию врача может быть защищена от полировки, так как полировку можно проводить на конкретно установленной высоте. Три цвета - три степени абразивности.



Abrasive Polishing Strip

Абразивные полоски для финирирования и полирования

Рулонные контурные штрипы для финишной обработки реставрации на контактных поверхностях. Изготовлены из эластичного полиэстера, на который нанесены частицы оксида алюминия. Ширина матрицы 4 мм. Цветовая маркировка различных вариантов абразивности.



Polydentia Composite & Universal Polishers

Полиры: универсальные и для композитов. Выпускаются в трех различных формах с цветовой маркировкой абразивности, автоклавируются при 134 °C (273 °F). Форма Cup особенно подходит для полирования выпуклых поверхностей, вместе с фиссурами и межзубными областями. Формы Flame и Mini-point показаны для полировки вогнутых поверхностей, особенно окклюзионных.

Универсальные полиры

Силиконовые полиры, специально разработаны для предварительной и финишной полировки амальгамы, золота и сплавов драгоценных металлов.

Полиры для композитов

Силиконовые полиры, показаны для предварительной и глянцевои полировки композитов, компомеров и стеклоиономерных материалов.

НОВИНКА: Подставка My-Rack - удобная и функциональная универсальная подставка для вращающихся инструментов, имеет множество преимуществ:

- Удобна для автоклавирувания полиров;
- В подставке My-Rack полиры не перепутаются при стерилизации в автоклаве;
- Незаменима для поддержания порядка на рабочем месте;
- Изготовлена из высококачественных материалов, автоклавируется при температуре 134 °C (273 °F). Автоклавируемая подставка My-Rack поставляется отдельно.



Универсальные Pre-Polish



Универсальные Polishers



Pre-Polish для композита



Polishers для композита

11 мм (XS)	Кол-во	Арт.
Коробка	200 шт.	REF 5011
Пакет	100 шт.	REF 5011s
Коробка	1000 шт.	REF 5011+
Neutral	200 шт.	REF 5011n
12 мм (S)	Кол-во	Арт.
Коробка	100 шт.	REF 5012
Пакет	100 шт.	REF 5012s
Коробка	1000 шт.	REF 5012+
Neutral	100 шт.	REF 5012n
13 мм (M)	Кол-во	Арт.
Коробка	100 шт.	REF 5013
Пакет	100 шт.	REF 5013s
Коробка	1000 шт.	REF 5013+
Neutral	100 шт.	REF 5013n
15 мм (L)	Кол-во	Арт.
Коробка	100 шт.	REF 5015
Пакет	100 шт.	REF 5015s
Коробка	1000 шт.	REF 5015+
Neutral	100 шт.	REF 5015n
17 мм (XL)	Кол-во	Арт.
Коробка	100 шт.	REF 5017
Пакет	100 шт.	REF 5017s
Коробка	1000 шт.	REF 5017+
Ассорти	Кол-во	Арт.
Коробка	100 шт.	REF 5001
Коробка	400 шт.	REF 5040
Коробка	600 шт.	REF 5060
Коробка	1000 шт.	REF 5001+




Характеристики	Кол-во	Арт.
11 мм (XS)	100 шт.	REF 6011
12 мм (S)	100 шт.	REF 6012
13 мм (M)	100 шт.	REF 6013
15 мм (L)	50 шт.	REF 6015
17 мм (XL)	50 шт.	REF 6017

Характеристики	Кол-во	Арт.
fine	200 шт.	REF 5902
medium	200 шт.	REF 5903
ассорти	200 шт.	REF 5923

Interdental wood wedges

Деревянные клинья

Изготовлены из высококачественной, без сколов древесины клена

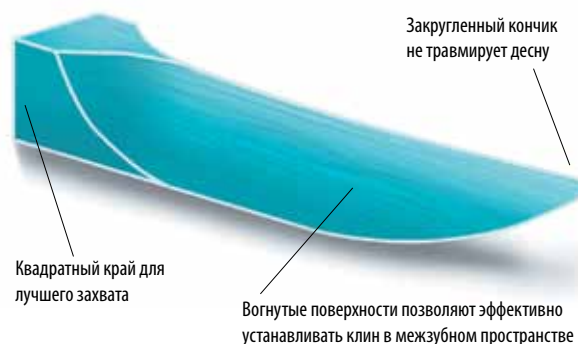

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Анатомическая форма клинышков помогает добиться оптимальной адаптации матрицы к шейке зуба
- Благодаря клинышкам производится необходимая компенсация сепарации зубов, созданной посредством установки матрицы
- Не расщепляются при наложении нагрузки, чрезвычайно стабильны при сжатии
- Помогают избежать свесов материала
- Изготовлен из сертифицированной древесины клена высшего качества
- Помогают создать плотный контакт матрицы в апроксимальном пространстве
- Доступны в 5 размерах: 11 мм (с наименьшими анатомическими изгибами, идеальны для применения в педиатрии), 12 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм, с цветовой маркировкой

My-Wedge™

Защита от перекрестной инфекции благодаря индивидуальной упаковке!

My-Wedge специально разработаны в соответствии с высокими стандартами безопасности и гигиены. My-Wedge - клинья в индивидуальной удобной упаковке. Клинья поставляются в компактных и практичных дозаторах по 50 или 100 штук. Изготовлены из высококачественной древесины клена, без сколов. 5 размеров - 5 цветов.



Transparent wedges

Прозрачные клинья

- Анатомическая форма клинышков помогает добиться оптимальной адаптации матрицы к шейке зуба, при этом защищается межзубный сосочек.
- Прозрачность клиньев позволяет производить отсвечивание всех полимеризуемых при помощи света материалов даже в апроксимальных областях
- Доступны в 2 размерах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Анатомическая форма
- Специальный прозрачный полимер
- Структурированная поверхность для оптимального отражения света
- Выдающиеся характеристики
- Оптимальная адаптация матриц
- Осевое отверстие облегчает размещение обычным стоматологическим пинцетом
- Доступны в 4 размерах, с цветовой маркировкой




Теперь есть клин, которого вы ждали...

Клинья

Прозрачные клинья с высокой эластичностью

The Wedge – это новое поколение прозрачных межзубных клиньев, изготовленных из соединений эластомерных термопластичных полимеров. The Wedge разработан врачами, имеет анатомическую форму и необычно устроенную головку, позволяющую проводить легкое введение клинышка в межзубное пространство при помощи пинцета. Эластичность и мягкость материала, из которого изготовлены клинышки, позволяет добиться превосходной и длительной адаптации матрицы к цервикальному краю зуба, даже если он является вогнутым. Поверхность The Wedge способствует максимальному отражению света и тем самым гарантирует полное отсвечивание светоотверждаемых материалов.

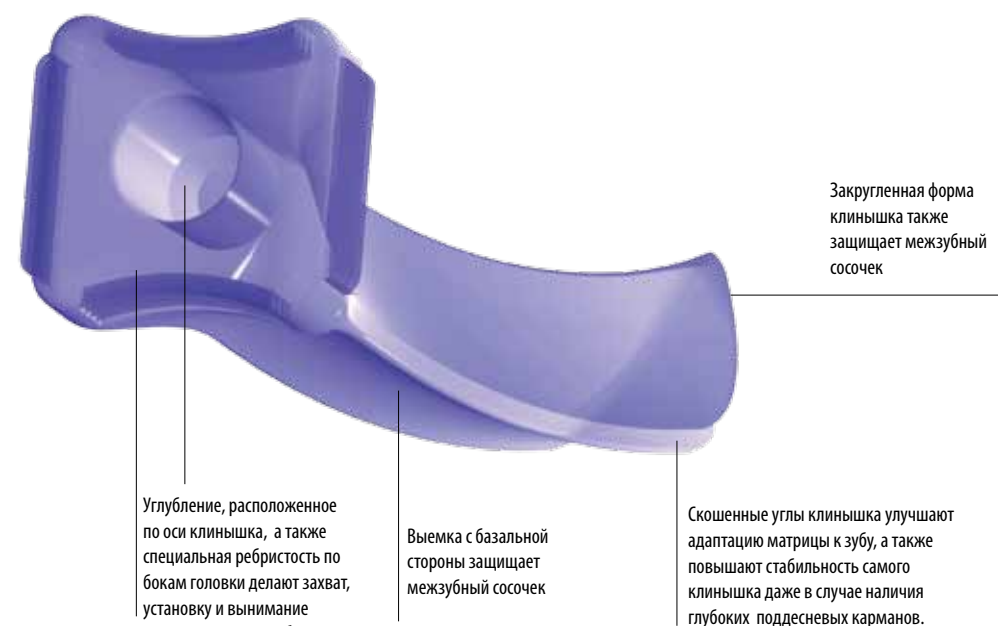

Характеристики	Кол-во	Арт.
ultrasmall	100 шт.	REF 7011
small	100 шт.	REF 7012
medium	100 шт.	REF 7013
large	100 шт.	REF 7015
ассорти	100 шт.	REF 7001
ассорти	400 шт.	REF 7040



Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com



Прозрачная отражающая поверхность The Wedge обеспечивает оптимальное отражение света и гарантирует полную полимеризацию светоотверждаемого пломбировочного материала




Клинические советы

Установка:

клинышек следует вводить в межзубный промежуток под углом 45 градусов к коронке зуба.

при таком введении клинышек автоматически устанавливается в правильную анатомическую позицию.

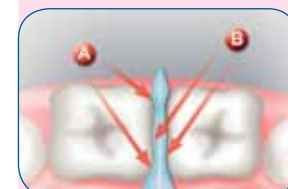

- A Параллельные стенки клинышка способствуют idealной установке клинышка от его основания до кончика.
- B Специальный полимер, из которого изготовлены клинышки, создает идеальную адаптацию матрицы и придает стабильность клинышку.



Coremat

Мультиразмерные матрицы для надстройки культи зуба

С помощью этих матриц надстроить культю быстрее и проще. Эти матрицы можно использовать как для фронтальной, так и для жевательной группы зубов. Благодаря системе Coremat можно подобрать индивидуальный размер матрицы для каждого конкретного пациента, что помогает избежать перекрестной контаминации, возникающей при использовании метода «проб и ошибок» при использовании матриц с одним размером.


Изготовлены из прозрачного полиэстера. Подходят для использования с композитами, стеклоиономерными цементами, акриловыми пластмассами и размягченными восками. Применение чрезвычайно просто: отрежьте матрицу по необходимому диаметру. Линия отреза соответствует основному гингивальному размеру. Наполните матрицу выбранным вами материалом. Установите матрицу на зуб и удерживайте на месте до момента полного затвердевания материала. В случае использования светоотверждаемого материала, не забудьте осветить конструкцию со всех сторон.

Удалите матрицу и закончите препарирование.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальны: могут использоваться на молярах и премолярах
- Быстрое и простое применение
- Подходит для светоотверждения
- Индивидуальный размер и форма
- Никакой перекрестной контаминации

Наименование	Кол-во	Артикул
Coremat	50 шт.	REF 5290

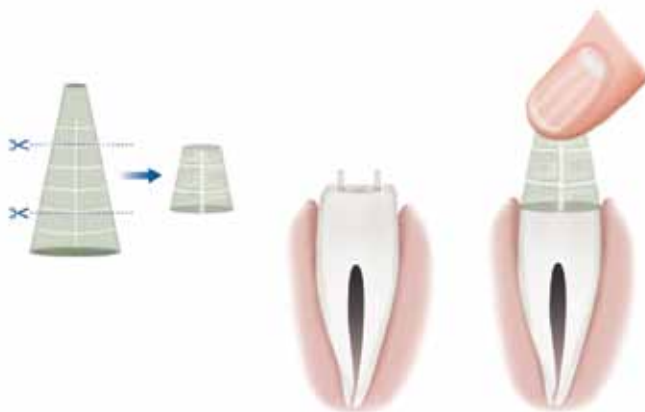

Polydentia GF Posts

Новые штифты белого опакowego цвета из стекловолокна для высокоэстетичной стоматологии.

Polydentia GF Posts являются замечательной альтернативой металлическим штифтам и идеальны для проведения эстетических реставраций как на передней, так и на боковой группе зубов.

Штифты состоят из большого количества однонаправленных стекловолокон, находящихся в специальной матрице, в состав которой входит полиэстер (материал, из которого изготовлена матрица, особенно хорош своими гипоаллергенными свойствами). Параллельно расположенные волокна усиливают структуру штифта и увеличивают его эластичность. Стекловолоконные штифты могут быть легко укорочены до необходимой длины. Мы рекомендуем укорачивать штифт перпендикулярно его длинной оси, используя алмазные боры средней или самой большой абразивности или сепарационные диски, что предупредит возгорание микроволокон.

Белый опаковой цвет штифтов Polydentia GF Posts позволит Вам добиться идеального эстетического результата без нежелательного подкрашивания пришеечной области зуба.

В случае, когда необходимо провести эндодонтическое лечение, штифт может быть легко удален при препарировании, что вызвано высокой механической прочностью штифтов.

Длина штифта – 20 мм. Доступны следующие размеры данных штифтов: 1.1 – 1.3 – 1.5 – 1.7 мм в диаметре.

Наборы Polydentia GF Posts включают в себя специальные промаркированные дрели, обеспечивающие идеальную постановку штифтов. Дрели также доступны отдельно в качестве рефиллов.



Механические свойства:

Модуль упругости стекловолоконных штифтов очень близок к модулю упругости дентина, и составляет 42 ГПа, что позволяет регулировать прилагаемые усилия посредством перераспределения их через компоненты дентина. В отличие от стекловолоконных штифтов, металлические штифты обладают модулем упругости, равным 210 ГПа, титановые – 110 ГПа, золотые – 77 ГПа, а штифты – из диоксида циркония – 200 ГПа. Стекловолоконные штифты обладают высокой устойчивостью к сжатию (600 МПа). Кроме того, стабильность культевой штифтовой конструкции возрастает благодаря высокой устойчивости штифтов к изгибанию (1500 МПа).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эстетика и биосовместимость
- Высокая прочность и надежность
- Апробированы медицинским факультетом Лаборатории биофизики Университета Лилля, Франция
- Модуль упругости штифтов аналогичен модулю упругости дентина
- Гомогенное распределение силы
- Никаких «стрессовых точек напряжения» в дентине, никаких фрактур корня
- Активная поверхность штифта способствует достижению оптимальной микро-механической адгезии к культе из композита
- Легко и быстро удаляются
- Минимальное препарирование зуба
- Восстановление культи зуба за одно посещение
- Автоклавируются при 134°C (273°F)

Наименование	Артикул
Polydentia GF Posts, состав:	REF 5291

5 штифтов Ø 1.3 мм

5 штифтов Ø 1.5 мм

5 штифтов Ø 1.7 мм

Polydentia GF Posts Набор, состав:	REF 5292
------------------------------------	----------

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.3 мм

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.5 мм

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.7 мм

Polydentia Precision Drills, состав:	REF 5299
--------------------------------------	----------

1 дрель Ø 1.3 мм

1 дрель Ø 1.5 мм

1 дрель Ø 1.7 мм

Polydentia GF Posts XS, состав:	REF 5283
---------------------------------	----------

5 штифтов Ø 1.1 мм

5 штифтов Ø 1.3 мм

5 штифтов Ø 1.5 мм

Polydentia GF Posts Kit XS, состав:	REF 5285
-------------------------------------	----------

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.1 мм

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.3 мм

5 штифтов + 1 дрель Ø 1.5 мм

Polydentia Precision Drills XS, состав:	REF 5284
---	----------

1 дрель Ø 1.1 мм

1 дрель Ø 1.3 мм

1 дрель Ø 1.5 мм

Refill упаковка:

Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø 1.1 мм REF 5281

Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø 1.3 мм REF 5293

Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø 1.5 мм REF 5295


Polydentia GF Posts 10 штифтов Ø 1.7 мм REF 5297

1 дрель Ø 1.1 мм REF 5282

1 дрель Ø 1.3 мм REF 5294

1 дрель Ø 1.5 мм REF 5296

1 дрель Ø 1.7 мм REF 5298

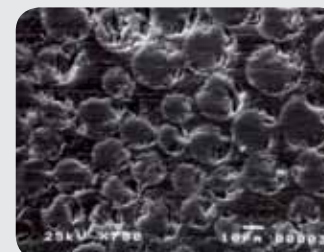

Поперечный распил стекловолокна. Стекловолокна распределены с высокой плотностью – занимают 80% всего пространства.

Фотографии Лаборатории of Biophysics, Университета Лилля, Франция



Polydentia GF Posts
Прозрачный,
оптимальная светопроводимость



Здоровый зуб



Установлен
металлический штифт
Концентрация давления на корень



Установлен
стекловолоконный штифт
Равномерное распределение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Незаменимы при работе с эндодонтическими инструментами
- 8 различных цветов
- С отверстием или без

Наименование	Кол-во	Артикул
Опаковый	100 шт.	REF 5301
Белый	100 шт.	REF 5302
Желтый	100 шт.	REF 5303
Красный	100 шт.	REF 5304
Голубой	100 шт.	REF 5305
Зеленый	100 шт.	REF 5306
Черный	100 шт.	REF 5307
Красно-коричневый	100 шт.	REF 5308
Ассорти	100 шт.	REF 5310
С отверстием	100 шт.	REF + h

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная упаковка
- Измерительная линейка
- Для многоразового использования

Наименование	Кол-во	Артикул
Stop-Card Опаковый	100 шт.	REF 5300/1
Stop-Card Белый	100 шт.	REF 5300/2
Stop-Card Желтый	100 шт.	REF 5300/3
Stop-Card Красный	100 шт.	REF 5300/4
Stop-Card Голубой	100 шт.	REF 5300/5
Stop-Card Зеленый	100 шт.	REF 5300/6
Stop-Card Черный	100 шт.	REF 5300/7
Stop-Card Красно-кор.	100 шт.	REF 5300/8

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сменная очищающая губка
- Измерительная линейка
- Отверстия для эндодонтических инструментов различных размеров
- Эргономичная форма
- Автоклавирруется при 134°C (273°F)

Наименование	Артикул
Endo-Gauge V02 + 20 губок	REF 5335
Губки V02 20 шт.	REF 5337

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежный захват
- Автоклавируются при 134°C (273°F)

Наименование	Кол-во	Артикул
Endo-Grippers	50 шт.	REF 5321

Endo-Stops

Ограничитель

Эти силиконовые стопоры также пригодны для мониторинга циклов стерилизации. Например, мы советуем начинать с более светлых цветов и использовать все более темные цвета при последующих циклах стерилизации.

Силиконовые ограничители имеют диаметр 3,5 мм, толщину 1 мм. Они рентгеноконтрастны, их можно стерилизовать в автоклаве при температуре 134 ° C (273 ° F). Выпускаются в 8 цветах, с отверстием и без отверстия.



Stop-Card

Органайзер для эндодонтических ограничителей

Простой и удобный органайзер для эндодонтических ограничителей. За один прием органайзер выпускает один ограничитель и удерживает его в удобном для нализывания положении. Рабочая длина инструмента может быть установлена с помощью встроенной измерительной линейки.



Встроенная измерительная линейка

Блок для подачи 1 ограничителя

Endo-Gauge V02

Эндодонтическая подставка

Простой и быстрый способ установки рабочей длины на эндодонтических инструментах (рабочая длина от 9 до 32 мм). Система Endo-Gauge V02 снабжена специальной губкой для очистки эндодонтических инструментов во время работы. Endo-Gauge V02 подходит для всех типов ручного и механического эндодонтического инструментария, а также для гуттаперчевых и бумажных штифтов. Endo-Gauge V02 изготовлена из нержавеющей стали, автоклавируется при 134°C (273°F). Подставка поставляется с 20 одноразовыми губками. Далее губки можно заказывать дополнительно.



Endo-Grippers

Ручки-насадки

Легко устанавливаются на ручки эндодонтических инструментов, увеличивая их диаметр, для обеспечения более надежного захвата инструмента. Удобны при работе в перчатках. Изготовлены из прозрачного силикона, не скрывают цвет ручки инструмента и его размер.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит металлов, 100% биосовместим, используется для шинирования, создания мостовидных конструкций и ортодонтических ретейнеров
- Неинвазивное применение, требующее минимальное препарирование зубов
- Лечение максимально удобно для пациента, а результат всегда высокоэстетичен
- Может применяться совместно с Fiber-Bond или любым другим светоотверждаемым бондинговым агентом.
- Быстр и прост в применении благодаря стандартным фиксирующим клипсам Polydentia
- Надежен и эластичен
- Отличное сочетание цена-качество, экономит рабочее время врача, достижение превосходного результата за 1 посещение
- Оптимальная податливость, не нужны какие-либо дополнительные ножницы или перчатки
- Поставляется в практичной упаковке

В ассортименте с 1989 года



ВАШЕ МНЕНИЕ:



PROF. DR. ALFREDO BASS
Córdoba – Argentina

«Результаты применения Fiber-Splint оказались действительно превосходными и стабильными. Для постановки ретейнера после ортодонтического лечения наиболее подходит двухмиллиметровая полоска Fiber-Splint. Она очень удобна в работе».



DR. G. DERCHI,
DDS La Spezia - Italy

«В своей практике я использую стекловолоконные изделия уже много лет. Fiber-Splint ML Multi Layer чрезвычайно практичен и надежен при фиксации временных коронок или шинирования выбитого зуба. Fiber-Splint ML Multi Layer обеспечивает комфорт и превосходную эстетику, а также способствуют лучшему заживлению мягких тканей».



DR. MAHESH CHAUHAN,
BDS New Delhi India

«При помощи Fiber-Splint стоматолог может быстро шинировать подвижный резец, при этом конструкция будет надежной продолжительный срок. Fiber-Splint - это всегда высоко эстетичный результат, он дает пациенту большую уверенность в себе».



Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com

The FIBER-SPLINT™

ЛИНИЯ ТОВАРОВ

FIBER-SPLINT™ ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ ДЛЯ:

- Шинирование очень подвижных зубов на продолжительный срок
- Используются при трансплантации и ре-имплантации зубов
- Зубы с посттравматической подвижностью
- Усиление мостовидных конструкций
- Неметаллические мостовидные конструкции типа Maryland
- Рентгеноционный период после ортодонтического лечения
- Удержание места
- Частичный или полный ремонт зубных протезов

Fiber-Splint™ является альтернативой обычным металлическим ретейнерам, обеспечивают превосходное эстетичное, биосовместимое и комфортное для пациента шинирование.

Технология Fiber-Splint™, давно известная в клинической практике, обеспечивает достижение отличных результатов всего за одно посещение стоматолога, кроме того она неинвазивна. Пользоваться стекловолоконным Fiber-Splint™ очень легко и удобно, что позволяет доктору и пациенту значительно экономить время и деньги.

После нескольких лет постоянного и успешного взаимодействия со стоматологами по всему миру, Polydentia пополнила линию продукции Fiber-Splint™ несколькими новыми товарами:

- F-Splint-Aid
- F-Splint-Aid Slim
- Clip&Splint
- Fiber-Splint™ ML Mini Starter Набор

Шинирование



Maryland мостовидная конструкция



Удержание места



Замещение зуба после травмы



Ретенция после ортодонтического лечения



Изображения предоставлены
Dr. G. Derchi, DDS - Италия

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Раствор готов к использованию, может использоваться в экстренных случаях
- Быстрое и неинвазивное нанесение
- Идеальное позиционирование стекловолоконной полоски с использованием фиксирующих клип Clip&Splint
- Биосовместимая альтернатива металлическим ретейнерам
- Высокая эстетика и комфорт для пациента
- Прочный и в то же время гибкий для превосходных результатов
- Новинка: F-Splint-Aid Slim – новая версия полосок шириной всего 2 мм. Та же прочность + лучшая гибкость

Наименование	Артикул
F-Splint-Aid	REF 5972
В наборе:	
Fiber-Splint ML Multi-Layer Ribbon (ширина 4 мм, длина 12 см)	
импрегнированная Fiber-Bond	
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы	
F-Splint-Aid Slim	REF 5977
В наборе:	
Fiber-Splint ML Multi-Layer Ribbon (ширина 2 мм, длина 12 см)	
импрегнированная Fiber-Bond	
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы	
Refill упаковка:	
Fiber-Bond, 2 флакона по 3 мл	REF 5973
Clip&Splint	10 шт. REF 5975CS
Скобы из нержавеющей стали	10 шт. REF 5975



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходное прилегание стекловолоконной ленты в межзубные пространства
- Отличная видимость рабочей зоны
- Благодаря своей прозрачности не препятствует светоотверждению
- Включены в каждую упаковку продуктов Фибер-Сплит

Наименование	Кол-во	Артикул
Clip&Splint	10 шт.	REF 5975CS



На старт - внимание - шинируй!

F-Splint-Aid & F-Splint-Aid Slim

Готовый к использованию раствор для быстрого, прочного и высокоэстетичного шинирования

F-Splint-Aid – стекловолоконная лента, импрегнированная бондинговым агентом. Идеальна для клинических ситуаций, в которых требуется срочное шинирование зубов. Благодаря простоте использования данный продукт подходит для стабилизации подвижных зубов и зубов, выпавших при травме или из-за парадонтологических проблем. F-Splint-Aid может использоваться для временной фиксации фронтальных зубов после их реимплантации или фиксации композитных зубов.

F-Splint-Aid Slim, лента шириной 2 мм. Применение данного вида ленты показано для воссоздания поверхностей при убыли ткани, а также в качестве ретейнера после активного ортодонтического лечения.

Практичные бутылочки с F-Splint-Aid и F-Splint-Aid Slim позволяют использовать стекловолоконные полоски, заранее импрегнированные бондом Fiber-Bond. Бутылочка содержит 12 см стекловолоконной ленты, которой хватает на 3-5 применений, в зависимости от проводимых процедур.

Применение F-Splint-Aid и F-Splint-Aid Slim заключается всего в нескольких простых шагах:

- Извлеките из баночки пропитанную бондом полоску необходимой длины
- Установите ее на заранее протравленную поверхность зубов
- Зафиксируйте стекловолоконную ленту на зубах при помощи Clip&Splint – специальных фиксирующих зажимов
- Отсветите полимеризующей лампой

Использовать стекловолоконные полоски очень просто, они не пушатся и не требуют применения специальных ножниц. Удобная баночка помогает избежать перерасхода стекловолоконной нити или бондингового агента, также она делает процедуру шинирования быстрой и комфортной как для врача, так и для пациента. Результаты высокоэстетичны, а процедура шинирования неинвазивна. Конструкции долговечны и надежны.

Clip&Splint

Прозрачные фиксирующие зажимы

Clip&Splint – специальные фиксирующие зажимы, разработанные фирмой Полидентия для обеспечения оптимального позиционирования и адгезии стекловолоконной ленты в межзубных промежутках во время светоотверждения. Благодаря этим зажимам, стекловолоконная лента идеально прилегает к поверхности зубов, обеспечивая результат без неровностей, предотвращая образование зубного налета.

Легкие в обращении, они обеспечивают хороший обзор рабочего поля. Clip&Splint сделаны из высококачественных материалов, гибкие и поэтому идеально адаптируются к зубной анатомии, обеспечивая оптимальные результаты. Эти зажимы могут автоклавироваться при 134°C, однако, рекомендуется одноразовое использование для того, чтобы были сохранены их оригинальные механические свойства. Clip&Splint включены в каждую упаковку продуктов Fiber-Splint.


Шинирование после травмы



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Клиническое применение с 1989г.
- Очень тонкая и прочная
- Универсальность


Наименование	Артикул
Fiber-Splint (ширина 4 мм, длина 3 метра)	REF 5970
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы	
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл	REF 5973
Clip&Splint	10 шт. REF 5975CS
Скобы из нержавеющей стали	10 шт. REF 5975

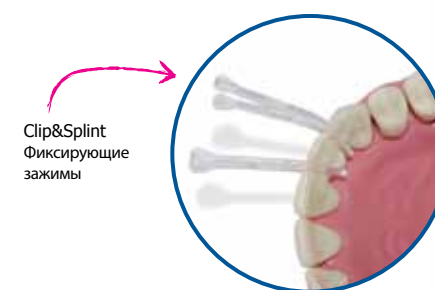

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эстетичная
- Неинвазивная
- Биосовместимая
- Быстрое применение

Наименование	Артикул
Fiber-Splint Ortho Evolution (ширина 2 мм, длина 60 см)	REF 5979
+ 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы	
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл	REF 5973
Clip&Splint зажимы	10 шт. REF 5975CS
Скобы из нержавеющей стали	10 шт. REF 5975

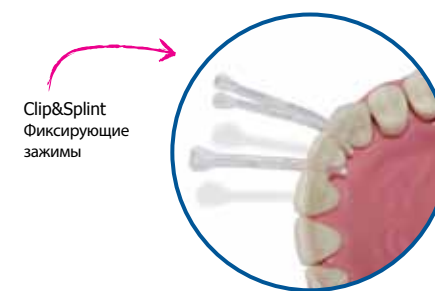

Fiber-Splint™

Однослойная стекловолоконная лента, тонкая и прочная

Чрезвычайно тонкая стекловолоконная лента (0,05 мм), 4 мм шириной делает силу адгезии в области межзубных промежутков на 30% больше.

Применять Fiber-Splint очень просто: первая полоска Fiber-Splint пропитывается бондинговым агентом, наносится на предварительно обработанную кислотой и бондом лингвальную/небную поверхность зубов, закрепляется клипсами и засвечивается. Данная последовательность действий повторяется еще пять раз, в итоге рекомендуется нанести шесть слоев ленты. Лечение максимально удобно для пациента, а результат всегда высокоэстетичен.



Экономия времени, гибкость и устойчивость!

Fiber-Splint™ Ortho Evolution

Многослойная лента для пост-ортодонтической фиксации

Стекловолоконная трехслойная полоска шириной 2 мм, предназначена для фиксации зубов после активного ортодонтического лечения. Является альтернативой металлическим ретейнерам, позволяет быстро, просто и эстетично зафиксировать результат ортодонтического лечения. Fiber-Splint Ortho Evolution комфортен и менее инвазивен для пациента.

Применять просто: полоску Fiber-Splint Ortho Evolution пропитывают бондинговым агентом и накладывают на заранее протравленную и покрытую бондом небную или лингвальную поверхность зубов. После этого полоску фиксируют при помощи клипс и полимеризуют. Можно накладывать два или более слоев полоски, используя данную методику.



Пост-ортодонтическая фиксация




Images courtesy of Dr. G. Derchi, D05 - Italy

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходный результат
- Надежность
- Экономия времени
- Нет срока годности

Наименование	Артикул
Fiber-Splint ML (ширина 4 мм, длина 50 см) + 5 Clip&Splint фиксирующие зажимы	REF 5971
Fiber-Bond 2 флакона по 3 мл	REF 5973
Clip&Splint	10 шт. REF 5975CS
Скобы из нержавеющей стали	10 шт. REF 5975

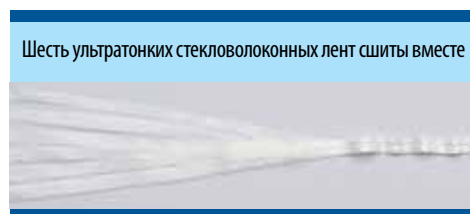

...шинирование никогда
не было проще!

Fiber-Splint™ ML Multi-Layer

Многослойная лента для простого и быстрого шинирования

Второе поколение шинирующих материалов Polydentia упрощает достижение традиционно превосходных результатов.

Fiber-Splint ML состоит из шести слоев полосок Fiber-Splint, наложенных друг на друга и сшитых вместе. Теперь не надо накладывать на зуб несколько одинарных полосок. Значительная экономия времени!

Fiber-Splint ML поставляется в удобных диспенсерах – коробочках, содержащих **50 см полоски, которой хватает приблизительно на 20-25 применений.** Срок годности продукта неограничен.

Многослойная лента **Fiber-Splint ML** обладает традиционной эластичностью и прочностью, что позволяет успешно проводить пародонтальное шинирование и усиление мостовидных конструкций.

Periodontal Splint

Clip&Splint
Фиксирующие
зажимы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальное прилегание полоски к поверхности зуба благодаря силиконовому ключу Fiber-Plast, позволяющему воссоздать первоначальную ситуацию
- Прозрачный силиконовый ключ Fiber-Plast позволяет производить полимеризацию сквозь слепок
- Высокоэстетичные результаты

Наименование	Артикул
Fiber-Splint ML Mini-Starter Набор	REF 5976e
Состав набора:	
1 Fiber-Splint ML Multi-Layer (ширина 4 мм, длина 50 см)	
1 Fiber-Plast 48 ml cartridge + 6 mixing tips	
1 Fiber-Bond (3 ml)	
Refill упаковка:	
Fiber-Bond 2 флакона 3 мл	REF 5973
Fiber-Plast (2 x 48 ml) + 12 mixing tips	REF 5974

Fiber-Splint™ ML Mini Starter Kit

The Fiber-Splint™ ML Mini Starter Kit позволяет создавать очень тонкие и при этом прочные шинирующие конструкции. Превосходный результат достигается благодаря применению стекловолоконной полоски Fiber-Splint™ ML Multi-Layer.

Использование силиконового ключа Fiber-Plast, входящего в состав набора, позволяет воспроизводить положение зубов с максимальной точностью, давая при этом оптимальные эстетические результаты. Более того, прозрачность силикона позволяет производить полимеризацию стекловолоконной полоски непосредственно через него.

Преимущества набора Mini Starter Kit особенно видны в случае шинирования или фиксации зубов после их экстракции.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность
- Быстрота и легкость
- Надежность
- Биосовместимость
- Устойчивость
- Эстетика

Наименование	Артикул
Fiber-Splint Lab System	REF 6500e
Состав:	
1 Fiber-Splint Lab Bridge (ширина 4 мм, длина 1 метр)	
1 Fiber-Splint Lab Ret (20 mm ширина, длина 1 метр)	
3 Fiber-Keys, 1 Fiber-Bond (5 ml)	
2 Fiber-Plast (2 x 48 ml) + 12 mixing tips	
Isolab (50 ml)	

Refill упаковка:

Fiber-Splint Lab Bridge (ширина 4 мм, длина 1 метр)	REF 6510e
Fiber-Splint Lab Ret (ширина 20 мм, длина 1 метр)	REF 6511e
Fiber-Key (3 шт.)	REF 6522
Fiber-Bond (2 x 5 ml)	REF 6525
Fiber-Plast cartridges (2 x 48 ml) + 12 mixing tips	REF 5974
1 Isolab (450 ml)	REF 6530



Supplied in
a NEW compact
and practical
case!

Fiber-Splint™ Lab System


Новый метод усиления стоматологических конструкций, изготовленных из пластмассы

Новая экономичная система, основанная на новейших технологиях с использованием стекловолокна. Система Fiber-Splint Lab System позволяет создавать мостовые конструкции с прочным биосовместимым каркасом, усиливает наиболее подверженные поломкам области новых протезов, а также может использоваться при починке протезов.


Вместо использования для усиления конструкции стальной или металлической проволоки, мы предлагаем использовать систему Fiber-Splint Lab System с ее многослойными стекловолоконными полосками, использовать которые чрезвычайно просто. Стекловолоконные полоски очень прочно соединяются с пластмассой.

Отличный эстетический результат достигается благодаря тому, что стекловолоконные полоски практически полностью незаметны под пластмассой и не просвечивают через нее.

Практика применения Fiber-Splint как шинирующей повязки для зубов фронтальной группы после их полного вывиха насчитывает около двух десятилетий.

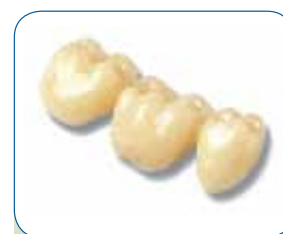THE FIBER-SPLINT LAB SYSTEM
РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЯХ ДЛЯ:

- Создания временных реставраций на абатментах имплантатов
- Как внутренний каркас мостов
- Усиления мостовидных конструкций
- Усиления новых полных или частичных протезов
- Ретенции единичных зубов при применении брекет системы
- Всех видов усиления трещин или других поломок протезов, а также усиление тонких мест

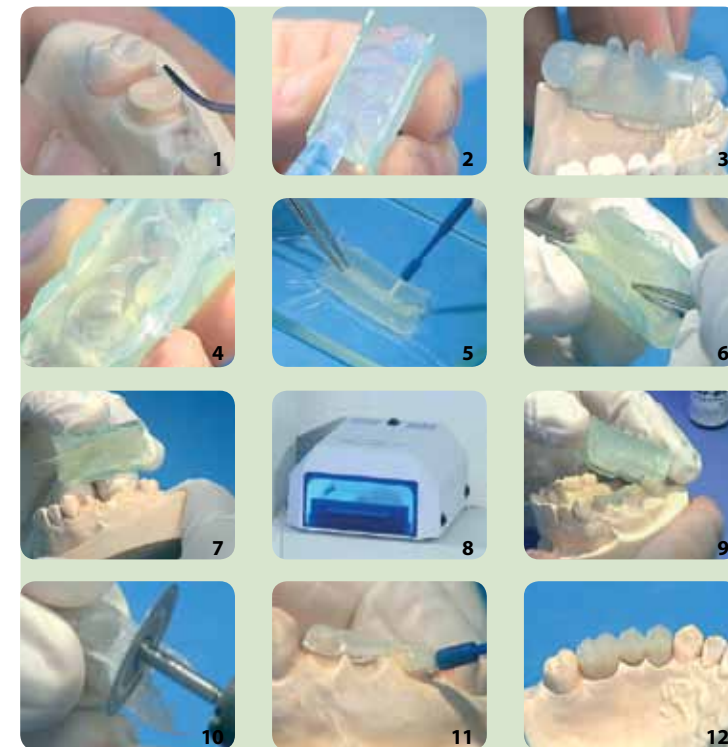

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультралегкий (16 г)
- Зажимы интегрированы в рамку для удобства фиксации экрана
- Угол наклона и высота регулируются
- Удобен при носке
- Защищает всё лицо
- Устойчив к царапинам
- Рамки доступны в 6 цветах



*Комфорт, защита
и стиль с 1989 года*

Vista-Tec™ ultra light

Очень легкий, прозрачный и надежный защитный экран для лица

Экраны Vista-Tec обеспечивают полную защиту лица (нос, рот, глаза) и обладают высокой прозрачностью.

Очень комфортные экраны, с элегантным дизайном. Защитные экраны изготавливаются из прозрачного экологически чистого пластика, устойчивы к царапинам, имеют антибликовое покрытие, и не меняют цвет при воздействии дневного света. Они могут быть использованы несколько раз, поскольку легко очищаются. Продаются как в комплектах с рамками, так и отдельно. Рамки доступны в шести различных цветах: белый, прозрачный, желтый, синий, розовый и зеленый.

Экраны не ухудшают обзор, не затрудняют коммуникацию с пациентом, легки и удобны при носке. После фиксации на рамке, экран можно отрегулировать по высоте и углу наклона.



... выбери свой цвет!



Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com



Наименование	Артикул
Ultra light Eco 1 рамка + 5 экранов	
белый	REF 5621/W
желтый	REF 5621/Y
голубой	REF 5621/B
прозрачный	REF 5621/T
розовый	REF 5621/P
зеленый	REF 5621/G
Ultra light Classic	
1 рамка + 10 экранов + 1 пара Clipon для очков	
белый	REF 5624/W
желтый	REF 5624/Y
голубой	REF 5624/B
прозрачный	REF 5624/T
розовый	REF 5624/P
зеленый	REF 5624/G
Refill упаковка:	
5 экранов	REF 5617
10 экранов	REF 5616
1 рамка	
белый	REF 5614/W
желтый	REF 5614/Y
голубой	REF 5614/B
прозрачный	REF 5614/T
розовый	REF 5614/P
зеленый	REF 5614/G

Многоразовые экраны!
Держите рамки и экраны чистыми с Polydentia Clean.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость и прозрачность
- Адаптирован для использования с хирургическими масками
- Рамки доступны в 6 цветах

Наименование	Артикул
Kit 1 рамка, 5 экранов для глаз	
белый	REF 5628/W
желтый	REF 5628/Y
голубой	REF 5628/B
прозрачный	REF 5628/T
розовый	REF 5628/P
зеленый	REF 5628/G
Refill упаковка:	
5 экранов для глаз	REF 5618
10 eyeshields	REF 5619

Vista-Tec™ ultra light Eyeshield

Очень легкий, прозрачный и надежный защитный экран для глаз

Защитные экраны для глаз подходят и доктору и пациенту. Экраны Eyeshields обеспечивают четкую видимость, защищены от запотевания, появления бликов и царапин.

Специальная конструкция этого экрана обеспечивает комфортную и надежную защиту. Экран адаптирован для использования с маской.




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко надевается и снимается
- Удобный, легкий и прозрачный
- Защищает всё лицо
- Устойчив к царапинам

Наименование	Артикул
Для очков, Clipon:	
1 пара Clipon, 5 экранов	REF 5622
Refill упаковка:	
5 экранов	REF 5617
10 экранов	REF 5616
Для луп, L-Clipon:	
1 пара Clipon, 5 L-экранов	REF 5630
Refill упаковка:	
5 L-экранов	REF 5631
10 L-экранов	REF 5632

Наименование	Артикул
3 Orange для лица	REF 5617/O
3 Orange для глаз	REF 5618/O

Информация о рамках для экранов Vista-Tec на стр. 24

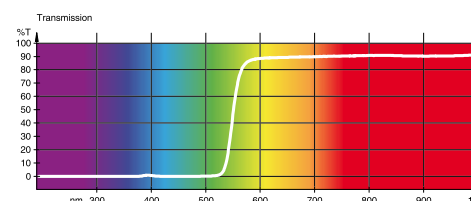

Наименование	Артикул
1 BluBloc	REF 6050

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Бактерицидный
- Не повреждает поверхность
- Антистатический
- Быстро испаряется, не оставляет следов
- Продлевает срок службы экранов

Наименование	Артикул
Polydentia Clean 125 мл	REF 5640

Clipon & L-Clipon

Защитный экран для использования с очками или лупами практически в любых оправах

Пластиковые зажимы для фиксации защитных экранов на Ваших очках (Clipon) и лупах (L-Clipon). Clipon проставляется с экранами стандартного размера. L-Clipon, наоборот, комплектуется более крупными экранами, подходящими для использования с лупами.



Многоразовые экраны!
Держите рамки и экраны чистыми с Polydentia Clean.

Vista-Tec™ Orange shields

Оранжевый защитный экран

Защищает ваши глаза от опасного синего излучения от светополимеризационных ламп (галогеновые, светодиодные, неоновые).

Высокое качество этих оранжевых экранов обеспечивает великолепные оптические качества, сохраняя при этом ваши глаза. Эти экраны легко фиксируются на рамки Vista-Tec и гарантируют комфортабельный, легкий по весу и эффективный барьер против высокоинтенсивного светового излучения, испускаемого используемыми светополимеризационными установками. Экраны доступны в 2 модификациях: для лица и для глаз. Экраны легко очищаются, их можно использовать повторно. Защитный экран Vista-Tec для глаз может использовать и доктор, и пациент.



BluBloc

Защитные очки

- Полная защита от синего излучения
- Стекла оранжевого цвета, изготовлены из акрила высокого качества
- Высокий уровень фильтрации (до 470 нм)
- Металлическая оправа



Polydentia Clean

Очиститель

Уникальное решение для очистки очков и экранов, обеспечение эффективной и бережной чистки и ухода за Vista-Tec. Мягко очищает экраны и очки от загрязнений и бактерий, успешно удаляет пыль, жир, масла и т.д.

Средство наносится на мягкую ткань или непосредственно на поверхность. Не нужно смывать. Жидкость быстро испаряется, не оставляя следов. Этот мягкий, но эффективный способ очистки увеличивает срок службы Вашего Vista-Tec. Практичная бутылка с распылителем, емкостью 125мл, обеспечивает достаточное дозирование чистящего средства. Средство имеет антистатический эффект, адаптировано для всех поверхностей, подходит для чистки защитных очков и экранов. Содержание алкоголя - менее 1 %, слегка ароматизировано. Не наносит вреда озоновому слою и экологии.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает сухость рабочего поля
- Подходит для детской стоматологии
- Автоклавируется при 134°C (273°F)

Наименование	Артикул
1 Cotton roll holder	REF 5405/1
4 Cotton roll holders	REF 5405/4

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Выпускаются в 4 различных формах
- Автоклавируются при 134°C (273°F)
- Химически резистентны

Наименование	Артикул
Угол 45°	REF 5811
Прямой	REF 5812
Угол 90°	REF 5813
Угол 110°	REF 5814


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сделан из нержавеющей стали
- Универсальный
- Автоклавируется при температуре 134 °C (273 °F)

Наименование	Артикул
Matrix retainer	REF 5390

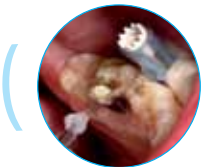

Maximat Plus
Альтернатива традиционному матрицедержателю!
Смотри на стр. 12

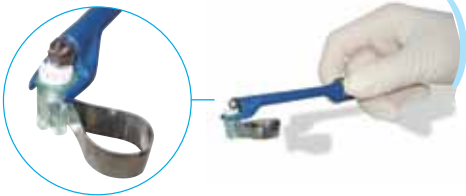

Universal matrix retainer

Универсальный матрицедержатель

- Нержавеющая сталь
- Универсальный и легкий
- Подходит для всех видов матриц из металла и полиэстера
- Автоклавируется при 134 °C (273 °F)



Cotton roll holder

Держатель ватных валиков

- Обеспечивает сухость рабочего поля
- Может использоваться на верхних и нижних челюстях
- Не ограничивает обзор и доступ в полость рта
- Сделан из нержавеющей стали
- Автоклавируется при 134 °C (273 °F)



Amalgam guns

Шприцы для амальгамы

- Изготовлены из высокопрочного пластика
- Легко разбираются
- Автоклавируется при 134 °C (273 °F)
- Доступны в 4 различных формах
- Диаметр наконечника: 2.3 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прогрессивное приспособление для извлечения, перемещения и удерживания мелких предметов
- Идеально подходит для матриц, клиньев, виниров, украшений и т.д.

Наименование	Кол-во	Артикул
Pick-it-easy	32 шт.	REF 5800



ID-Rings		
Наименование	Кол-во	Артикул
Коричневый	50 шт.	REF 5311
Белый	50 шт.	REF 5312
Желтый	50 шт.	REF 5313
Красный	50 шт.	REF 5314
Голубой	50 шт.	REF 5315
Зеленый	50 шт.	REF 5316
Черный	50 шт.	REF 5317
Оранжевый	50 шт.	REF 5318
Серый	50 шт.	REF 5319
Розовый	50 шт. <i>NEW</i>	REF 5322
Ассорти	120 шт.	REF 5320

Maxi ID-Rings		
Наименование	Кол-во	Артикул
Коричневый	25 шт.	REF 5361
Белый	25 шт.	REF 5362
Желтый	25 шт.	REF 5363
Красный	25 шт.	REF 5364
Голубой	25 шт.	REF 5365
Зеленый	25 шт.	REF 5366
Черный	25 шт.	REF 5367
Оранжевый	25 шт.	REF 5368
Серый	25 шт.	REF 5369
Розовый	25 шт. <i>NEW</i>	REF 5370
Ассорти	30 шт.	REF 5360

Pick-it-easy

Чтобы удерживать и точно размещать небольшие и хрупкие предметы

Изящное приспособление, с клеящейся головкой для легкого поднятия, надежного удерживания и размещения маленьких и хрупких предметов.

Незаменим при извлечении одной матрицы или клинышка из упаковки, не деформирует предметы и гарантирует максимальный уровень гигиены. Также подходит для захвата и помещения виниров, зубных украшений, и других маленьких предметов. Pick-it-easy чувствителен к давлению. Он прикрепляется к поверхности предмета легким прикосновением и легко отсоединяется при небольшом повороте, не оставляя никаких следов адгезива. Pick-it-easy сделан из гибкого пластика. Адгезивная головка сохраняет свою клеящую способность и может быть использована несколько раз. Клинические процедуры становятся легче и быстрее.



ID-Rings and Maxi ID-Rings

Цветные кольца и большие цветные кольца

- Цветные кольца для идентификации инструментов
- Изготовлены из упругого силикона
- Автоклавируются при 134 °C (273 °F)
- Доступны в 10 различных цветах
- ID-Rings размеры: наружный диаметр 6 мм; внутренний диаметр 3 мм
- Maxi ID-Rings размеры: наружный диаметр 9 мм, внутренний диаметр 6 мм; (для цветовой маркировки инструментов с большим диаметром ручки)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое высыхание
- Идеально подходит для полированных поверхностей, таких как металл, золото или керамика

Наименование	Артикул
Occlublu, 10 мл	REF 5900

Occlublu

Оклюзионный раствор
Для простого и точного определения
завышенных участков и точек давления

Позволяет быстро и просто определить суперконтакты при посадке единичной коронки, вкладки (inlays, onlays), телескопических коронок и различных фиксирующих элементов. При помощи Occlublu можно отметить окклюзионные контакты. Occlublu идеален для проверки краев пломбы на апроксимальных и окклюзионной поверхностях и контактов в области слизистой оболочки. Насадки на баночку Occlublu существуют двух типов: для нанесения раствора кисточкой и в виде капель. Данный выбор насадок позволяет в полной мере соблюдать гигиенические правила. Данная маркирующая жидкость очень быстро высыхает за счет моментального испарения растворителя, после чего образуется ультратонкая пленка (около 3 нм). Удалить Occlublu с поверхности зуба очень просто – или при помощи струи воды, или при помощи ватного тампона, смоченного в спирте, а также используя резиновые головки. Идеально подходит для таких поверхностей, как металл, золото или керамика.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортен для пациента
- Предназначен для многократного использования
- Автоклавировается при температуре до 121 °C (260 °F)
- Представлен в 6 ярких цветах

Наименование	Кол-во	Артикул
Белый	10 шт.	REF 5650/W
Желтый	10 шт.	REF 5650/Y
Оранжевый	10 шт.	REF 5650/O
Зеленый	10 шт.	REF 5650/G
Голубой	10 шт.	REF 5650/B
Фиолетовый	10 шт.	REF 5650/V
Ассорти	10 шт.	REF 5650/A

Holdy

Держатель салфеток

Holdy - держатель для салфеток любого типа и размера. Изготовлен из полипропилена. Очень легкий и удобный, не создает неудобства пациенту.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действует быстро
- Легок и удобен в применении
- Экономичен

Наименование	Артикул
Anti-Mist, 15 мл	REF 5601

Anti-Mist

Антизапотеватель-карандаш

Разработан специально для предотвращения запотевания стоматологических зеркал и очков. Очень легко наносится, более экономичен по сравнению с распылителем. Предназначен для применения только на стерилизованных поверхностях.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точное дозирование
- Нет перекрестному заражению
- Для микрокистей и микроаппликаторов
- Можно работать одной рукой
- Мембраны можно автоклавируют при температуре 134 ° C (273 ° F)

Наименование	Артикул
1 контейнер + 5 мембран	
Желтый	REF 5411/Y
Оранжевый	REF 5411/O
Зеленый	REF 5411/G
Фиолетовый	REF 5411/V
Голубой	REF 5411/B
Дополнительные мембраны 5 шт.	REF 5415

Hy-Drop

Дозатор дезинфицирующих жидкостей

В диспенсере Hy-Drop можно хранить 4 мл жидкости (приблизительное количество антисептика, используемое ежедневно врачом-стоматологом). После однократного нажатия на мембрану диспенсера Hy-Drop, из нее выделяется ровно одна капля раствора, находящегося в диспенсере. Таким образом, осуществляется эффективный контроль над расходом жидкости. Мембрану следует заменять и стерилизовать после каждого пациента во избежание перекрестной инфекции. Мембраны стерилизуемы при T=134 °C, а контейнер – при T=121°C.


Hy-Drop изготовлен из полипропилена и легко поддается очистке. Помимо этого, несколько диспенсеров может крепиться один к другому для экономии места. Существует пять разных цветов во избежание перепутывания контейнеров. К каждому контейнеру в комплекте прилагается 5 мембран. Очень удобны при применении микробрашей и микроаппликаторов.



Смотри видеоролик на:
www.polydentia.com



Легкое надавливание на мембрану микробрашом или микро-аппликатором освобождает требуемую жидкость экономично, капля за каплей

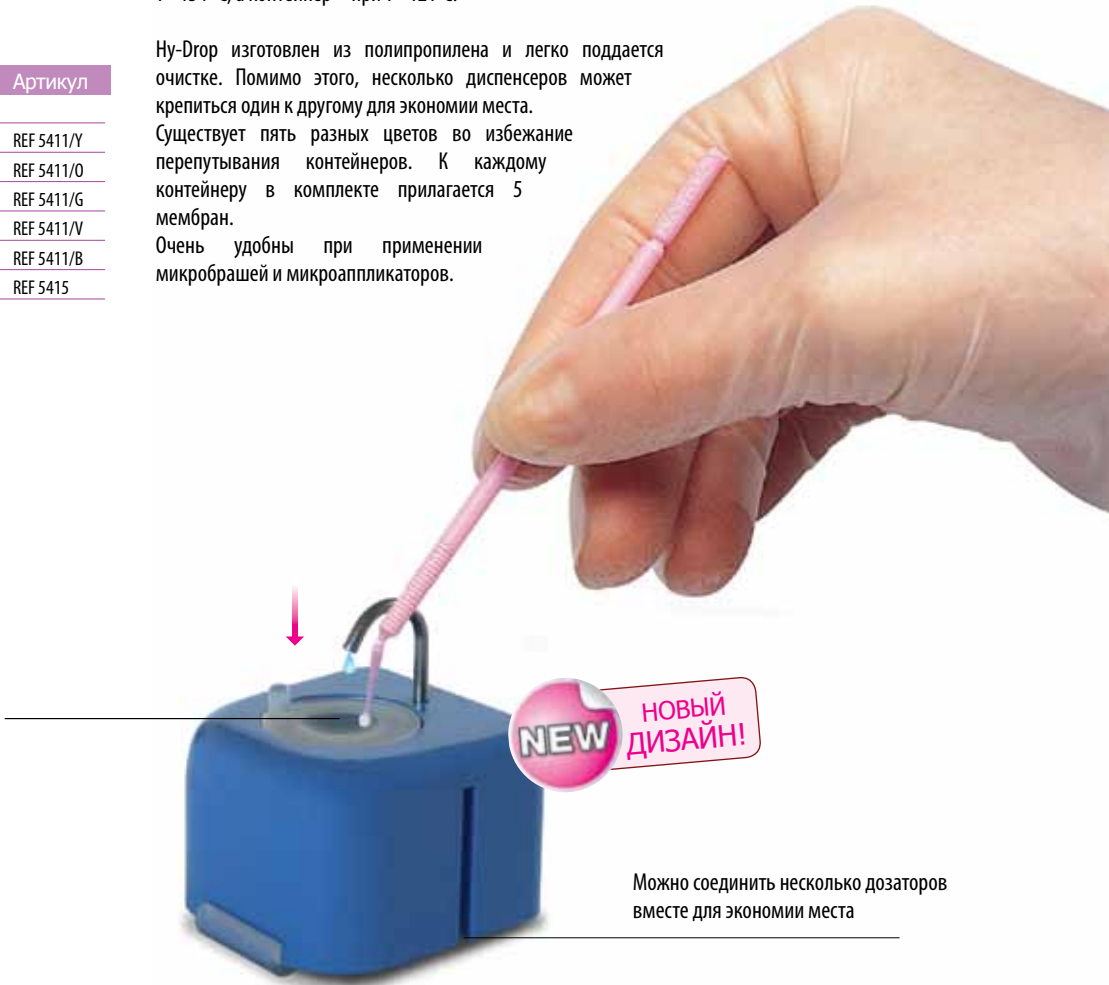

NOVY DIZAYN!


Можно соединить несколько дозаторов вместе для экономии места



**STEP INTO
POLYDENTIA'S
WORLD**

4 способа оставаться на связи с нами

4 причины присоединиться к сети с Polydentia!

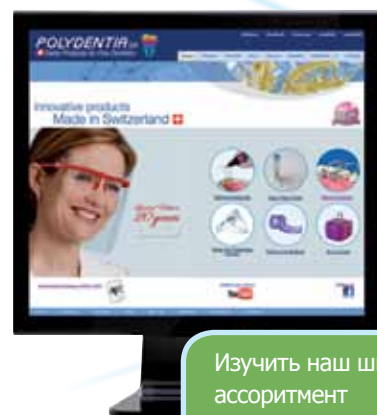

Изучить наш широкий
ассортимент
продукции на
www.polydentia.ru

1



Смотреть демонстрации
продуктов и
клинических случаев на
Youtube

4



Общайтесь с нами на Facebook

③



2. Получить эксклюзивные новости о наших новинках и предстоящих событий на Twitter

②

новые сайты онлайн!

www.polydentia.com

www.kraftwaydental.ru

Дополнительная информация, видео, инструкции, клинические случаи - все что вам нужно,
с помощью нескольких кликов мыши!

Бланк заказа

[illegible]

Адреса дилеров: